


CURED[®]

HEALTH IS WHAT WE REPRESENT

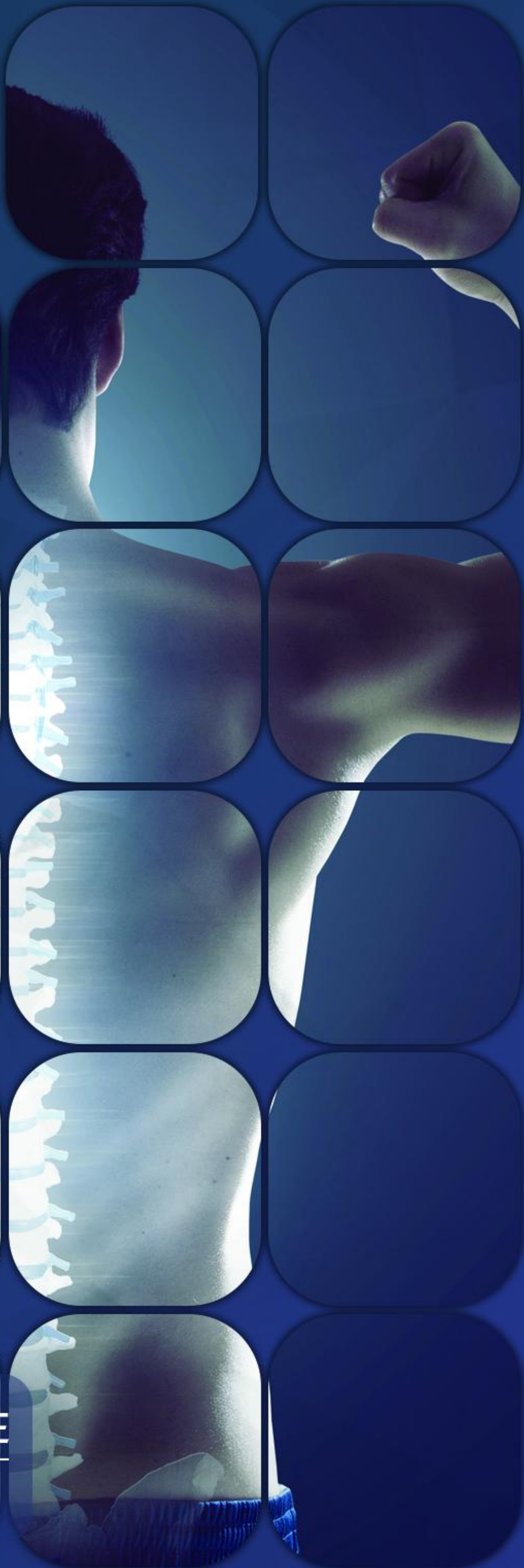

CURED CATALOGUE
2023 (FARSI) V.3

رزومه شرکت سپید تن پرنیان پویش:

شرکت تعاونی دانش بنیان سپید تن پرنیان پویش مستقر در پارک علم و فناوری گلستان تحت برند CURED به شماره ثبت ۱۰۵۶۴ در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید و فعالیت تولیدی خود را با طراحی و ساخت انواع ارتزفیزیوتراپی و توانبخشی در استان زیبای گلستان در شمال ایران آغاز کرد. از آنجاییکه این شرکت از ابتدا متعهد به ارائه محصولات نوآورانه و منطبق با استانداردهای روز دنیا بوده با تیمی از متخصصان ارتز و پروتز در بخش تحقیق و توسعه خود همکاری نزدیک دارد. در سال ۲۰۲۰، پس از اپیدمی کووید-۱۹ در سراسر جهان، با رویکرد جلوگیری از همه گیری این بیماری در سراسر جهان، وظیفه خود دانستیم انواع ماسک های پزشکی تخصصی مانند ماسک های جراحی سه لایه، N95، N99 و ماسکهای نوین الکترونیکی فن دار را تولید نماییم. بنابراین، تیم تحقیق و توسعه خود را گسترش داده و با رویکرد خودکفایی در توسعه تولید ماسک های پزشکی تخصصی، اقدام به ساخت ماشین آلات خط تولید ماسک نموده و سه خط تولید جدید برای تولید انواع ماسک ها و ماشین آلات تخصصی پزشکی و فیلترهای نانو را به خطوط تولید خود اضافه نمودیم. علاوه بر تمامی این خطوط تولید، خط جدید تولید پارچه های نانو فیلتراسیون به روش الکتروسی را با هدف خودکفایی در تولید پارچه های فیلتراسیون تخصصی با فناوری نانو جهت استفاده در ماسک های پزشکی، هپا و سایر فیلترهای تخصصی پزشکی راه اندازی نمودیم. ما امروز در ساخت ماشین آلات تولید ماسک، پارچه های فیلتراسیون و انواع ماسک های پزشکی خودکفا هستیم و می توانیم در مبارزه با بیماری های همه گیر مانند کووید-۱۹ سهمی داشته باشیم.

شرکت سپید تن پرنیان پویش با اخذ گواهینامه های بین المللی مدیریت کیفیت ISO13485 و ISO9001 و GMP از شرکت BRS آمریکا استانداردهای بین المللی لازم را در خط تولید خود پیاده سازی نموده است. همچنین ما با بررسی عملکردی و بالینی محصولات در مراکز علمی و دانشگاههای معتبر ایران توانسته ایم تاییدیه سلامت محصولات را دریافت نموده که گویایی اثر بخشی فعالیتهای علمی در این سازمان می باشد. در حال حاضر این شرکت موفق به دریافت پروانه های ساخت وسایل پزشکی در شش گروه تخصصی شامل:

۱- فیزیوتراپی و توانبخشی

۲- گروه تجهیزات طب اورژانس (شامل محصول تثبت کننده آنی لگن بعد از تروما (TPOD) و کولار گردنی طبی)

۳- گروه دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی و باندازها

۴- گروه البسه پزشکی

۵- گروه ماسک های فیلتردار (شامل انواع ماسک N95, N99, Electric Fan Mask)

۶- گروه ماسک های جراحی از سازمان غذا و دارو (IFDA) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور گردیده است. این شرکت در سال ۱۳۹۳ عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی کشور گردید و از سال ۱۳۹۴ با دریافت مجوز واحد فناور از پارک علم و فناوری استان گلستان در حال فعالیت می باشد.

این شرکت به منظور رفع نیاز مشتریان، اقدام به بررسی و امکان سنجی ارائه محصولات به روز، زیر نظر کارشناسان مجرب، با هدف ساخت محصولاتی با کیفیت بالا نموده است. امروزه ترکیب فناوری پیشرفته و تحقیق و توسعه متمرکز و ایده های نوآورانه در کنار و ارتباطات موثر، قیمت های رقابتی و تیم حرفه ای این شرکت را قادر ساخته است تا به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه های نوین پزشکی اقدام به تولید محصول نوآورانه نماید.

خط مشی ما این است که بتوانیم با تولید محصولات با کیفیت سلامتی را به همه جوامع هدیه نماییم.

سلامتی هدیه ماست. "Health is what we represent."

ستون فقرات

ستون فقرات دارای سه بخش اصلی گردنی، سینه ای و کمری است. هفت مهره ی گردنی، دوازده مهره ی سینه ای و پنج مهره ی کمری ستون فقرات را تشکیل می دهند.

مهره های گردنی (Cervical Vertebrae): عملکرد اصلی مهره های گردنی یا ستون فقرات گردنی تحمل وزن سر (حدود ۵ کیلوگرم) است. این ۷ مهره گردنی از C1 تا C7 شماره گذاری شده اند. گردن به دلیل اتصال دو مهره ویژه به مجموعه بالا ترین دامنه حرکتی را دارد. مهره C1 حلقوی بوده، اطلس نام داشته و به صورت مستقیم به مجموعه متصل می شود. این اتصال امکان انجام حرکت آری و تایید را با سر به افراد می دهد. مهره دوم C2 اکسیس (آسه) نام داشته و دارای یک برجستگی به نام زائده دندانانی است که مهره اطلس بر روی آن می چرخد. این مهره امکان انجام حرکت نه و چرخش سر به اطراف را می دهد.

مهره های سینه ای (Thoracic Vertebrae): عملکرد اصلی ناحیه سینه ای نگه داشتن قفسه سینه و محافظت از قلب و ریه هاست. ۱۲ مهره سینه ای از T1 تا T12 نام گذاری می شوند. دامنه حرکت در ناحیه سینه ای محدود است.

مهره های کمری (Lumbar Vertebrae): در رابطه با مهره کمر باید گفت که عملکرد اصلی ناحیه کمری، تحمل وزن بدن است. ۵ مهره ناحیه کمری از L1 تا L5 نام گذاری می شوند. این مهره ها از نظر اندازه بسیار بزرگ تر هستند که دلیل آن نیز جذب فشار ناشی از بلند کردن و حمل اجسام سنگین است.



Cervical spine

C 1	Atlas
C 2	Axis
C 3	3. Cervical vertebrae
C 4	4. Cervical vertebrae
C 5	5. Cervical vertebrae
C 6	6. Cervical vertebrae
C 7	7. Cervical vertebrae

Thoracic spine

Th 1	1. Thoracic vertebrae
Th 2	2. Thoracic vertebrae
Th 3	3. Thoracic vertebrae
Th 4	4. Thoracic vertebrae
Th 5	5. Thoracic vertebrae
Th 6	6. Thoracic vertebrae
Th 7	7. Thoracic vertebrae
Th 8	8. Thoracic vertebrae
Th 9	9. Thoracic vertebrae
Th 10	10. Thoracic vertebrae
Th 11	11. Thoracic vertebrae
Th 12	12. Thoracic vertebrae

Lumbar spine

L 1	1. Lumbar vertebrae
L 2	2. Lumbar vertebrae
L 3	3. Lumbar vertebrae
L 4	4. Lumbar vertebrae
L 5	5. Lumbar vertebrae

Spine Cervical



Soft Collar Cervical Collar

Comfortable
Protection &
Covered with two
layers of fabric
Code: 1201



با روکش پنبه‌ای، با برش منحنی شکل در قسمت قرارگیری چانه.

• موجود در سه ارتفاع: ۷,۵ سانتی متر (۲,۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳,۵۴ اینچ)، ۱۰,۵ سانتی متر (۴,۱۳ اینچ) برای افراد دارای ارتفاع گردن متفاوت.

مواد سازنده:

فوم TDI، الاستیک، پلی استر، نایلون

جدول سایز بندی:


برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم‌ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷,۵ سانتی متر (۲,۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳,۵۴ اینچ)، ۱۰,۵ سانتی متر (۴,۱۳ اینچ) موجود میباشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.

S	32-36cm (12.59-14.17")
M	36-40cm (14.17-15.74")
L	40-44cm (15.74-17.32")
XL	44-48cm (17.32-18.89")
2XL	48-52cm (18.89-20.47")

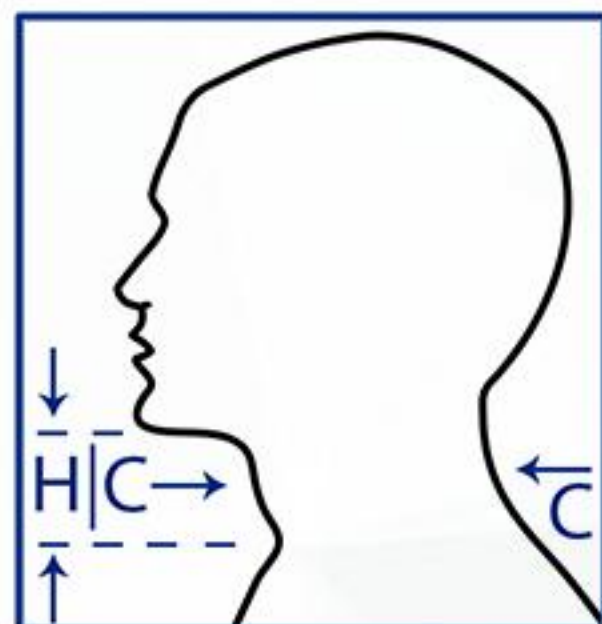

نام محصول:

کولار نرم

مشخصات:

کولار نرم کیورد به صورت ویژه ای طراحی شده است تا با ایجاد یک حمایت انعطاف پذیر با پد بالشتی در اطراف گردن باعث کنترل فشار بر مهره های گردنی گردد. این محصول در مراحل اولیه صدمات خفیف گردنی به ریکاوری و استراحت عضلات گردنی کمک میکند. این محصول کمک میکند تا حرکت گردن کنترل شده، بنابراین حرکات بیش از حد یا ناخواسته گردن کاهش یابد و عضلات و تاندون‌ها بیش از حد کشیده نشوند. ابر نرم بکار رفته در داخل این محصول به آن اجازه می دهد تا به راحتی در روی استخوان های ترقوه و زیر چانه شکل و حالت بگیرد.

موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس گردنی
- HIVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشکی)

ویژگی ها:

- ایجاد محدودیت حرکتی مهره های گردنی.
- قابل استفاده راحت در طی روز یا شب.
- از مهره های گردنی در موقعیت خمشی یا آناتومیک پشتیبانی می کند.
- ساخته شده از فوم با ضخامت ۲۵ میلی متر، پوشانده شده



Semi Rigid Splint

Cervical Collar

Comfortable
Protection &
Covered with two
layers of fabric
Code: 1202

نام محصول:

اسپلینت کولار نیمه سخت

مشخصات: اسپلینت کولار نیمه سخت کیورد به صورت ویژه ای طراحی شده است تا در نتیجه آن آسیب خفیف تا متوسط عضله، رباط و تاندون گردنی از طریق قرار دادن پد بالشتی در اطراف آن محافظت گردند. همچنین این گردنبد می تواند برای کمک به قرار گرفتن گردن در وضعیت آناتومیک استفاده شود. این محصول با کاهش حرکت گردن و کمک به اطمینان از عدم فشار بیش از حد به عضلات و تاندون ها، موجب میشود عضلات گردن استراحت کرده و ریکاوری گردند. همچنین، پنل پلی اتیلنی این محصول را می توان جدا کرد تا امکان افزایش تدریجی دامنه حرکتی فراهم گردد. این سیستم مدولار برای درمان قبل از عمل، پس از عمل و توانبخشی ناحیه گردن ایده آل است.

موارد استفاده:

- آرتروز
- اسپوندیلوزیس گردنی
- HIVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

ویژگی ها:

- این کولار گردنی به شکل آناتومیک گردن طراحی شده است.
- از مهره های گردنی ستون فقرات در وضعیت آناتومیک حمایت میکند.
- ابر نرم بکار رفته در ساختار این محصول در کنار اسپلینت پلی اتیلنی تقویت کننده متصل به آن امکان ایجاد یک

حمایت مطمئن را برای کسانی که در ناحیه گردنی دچار بی ثباتی شده اند، فراهم میسازد.

- پنل پلاستیکی اسپلینت، به صورت تدریجی و با تجویز پزشک میتواند جهت افزایش دامنه حرکتی گردن از این محصول جدا شود. این محصول در ۳ ارتفاع در دسترس میباشد. $7,5\text{cm}$ ($2,95''$), 9cm ($3,54''$), $10,5\text{cm}$ ($4,13''$)

مواد سازنده:

فوم TDI، الاستیک، پلی استر، نایلون، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید.


ارتفاع چانه: $7,5$ سانتی متر ($2,95$ اینچ)، 9 سانتی متر ($3,54$ اینچ)

اینچ)، $10,5$ سانتی متر ($4,13$ اینچ) موجود میباشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.

S	32-36cm (12.59-14.17")
M	36-40cm (14.17-15.74")
L	40-44cm (15.74-17.32")
XL	44-48cm (17.32-18.89")
2XL	48-52cm (18.89-20.47")

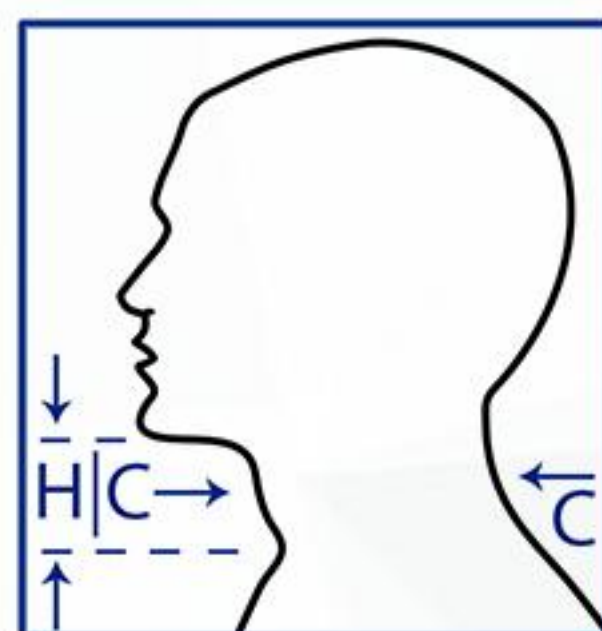

Spine Cervical



Hard ADJ Cervical Collar

Comfortable
Protection
Code: 1301



ویژگی ها:

- مهره های گردنی را در وضعیت آناتومیک قرار می دهد.
- این محصول از نظر وزنی بسیار سبک است.
- بدنه پانچ شده محصول، تهویه پوست را در زمان استفاده بهبود می بخشد، راحتی و رضایت بیمار را افزایش می دهد.
- این کولار گردنی دارای قابلیت تنظیم ارتفاع است.

مواد سازنده:

پلی اتیلن، فوم، نایلون، پلی استر


جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷.۵ سانتی متر (۲.۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳.۵۴ اینچ)، ۱۰.۵ سانتی متر (۴.۱۳ اینچ) موجود میباشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.

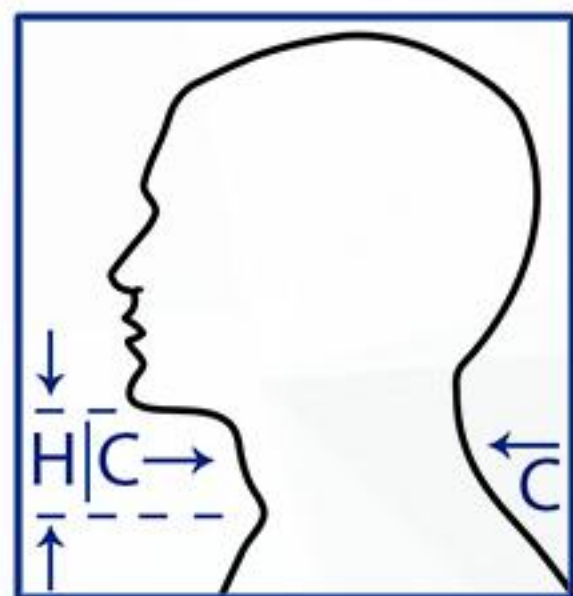

M

30-44cm (11.81-17.32")

L

34-48cm (13.38-18.89")

نام محصول:

کولار سخت (قابل تنظیم)

مشخصات:

کولار سخت قابل تنظیم کیورد برای حمایت، بی حرکت کردن یا تنظیم گردن در وضعیت های حرکتی مختلف گردن از جمله فلکشن (خم شدن به سمت بدن)، اکستنشن (خم شدن به سمت بیرون یا باز شدن) یا هایپراکستنشن (خم شدن به سمت بیرون یا باز شدن بیشتر از شرایط عادی) استفاده می شود. این گردنبد با کاهش دامنه حرکتی گردن و اطمینان از اینکه عضلات و تاندون ها بیش از حد کشیده نشده اند، به استراحت و بازیابی عضلات گردن کمک می کند. شکل آناتومیکی، قابلیت تنظیم ارتفاع و لایه فوم لبه، باعث افزایش نرمی محصول و راحتی کاربر میشوند. این محصول برای قرار گرفتن راحت در بالای استخوان ترقوه و زیر چانه طراحی شده و به کاهش فشار گرانشی ناشی از وزن سر بر روی گردن کمک می کند. این کولار در مواردی که نیاز به بی حرکتی زیاد در ناحیه گردن میباشد توصیه می شود.

موارد استفاده:

- آرتروز
- شکستگی گردن
- اسپوندیلوزیس گردنی
- HIVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

Spine Cervical



Philadelphia Cervical Collar

Used in Hospitals

Code: 1101
(Tracheostomy & MRI
Compatible)

Code: 1102
(MRI Compatible)



موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس گردنی
- HIVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهرهای گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشکی)
- بیماری های دیسک گردن
- شکستگی ستون فقرات گردن
- جابجایی و لغزش مهره ها
- بعد از جراحی های ستون فقرات گردن


مواد سازنده:

فوم، EVA، پلی اتیلن، پلی استر، نایلون

جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید. اگر سایز بدست آمده بین دو سایز بود سایز بزرگتر را انتخاب نمایید.
C = دور گردن.

XS	28-32 cm (11.02-12.59")
S	32-36 cm (12.59-14.17")
M	36-40 cm (14.17-15.74")
L	40-44 cm (15.74-17.32")
XL	44-48 cm (17.32-18.89")

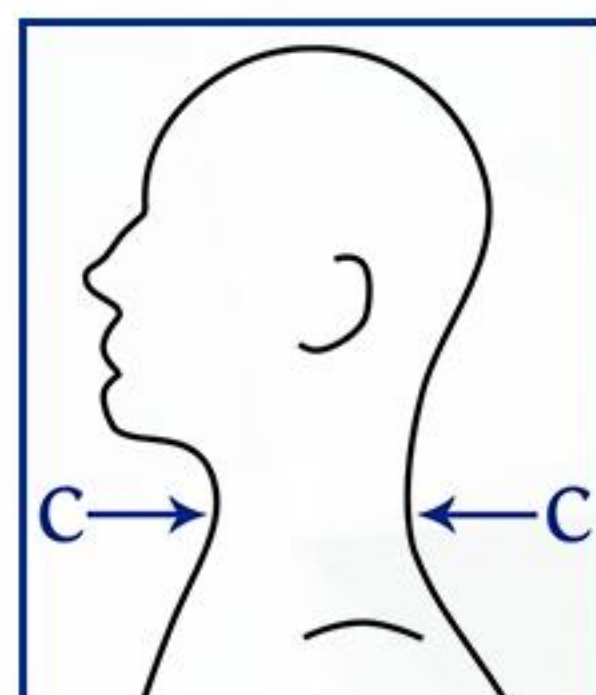

نام محصول:

گردنبند فیلادلفیا

مشخصات:

گردنبند فیلادلفیا، بریس سختی است که برای جلوگیری از حرکات سر و گردن بعد از آسیب، مورد استفاده قرار می گیرد. گردنبند فیلادلفیا از عضلات گردن محافظت می کند و سبب بهبودی عضلات و لیگامانت های گردنی می شود. زمانی که افراد دچار آسیب سر یا گردن می شوند، ممکن است شکستگی گردن رخ داده باشد. این موضوع آنها را در معرض خطر آسیب نخاعی قرار می دهد که ممکن است بر اثر حرکت شدید منجر به معلولیت یا مرگ شخص شود. این گردنبند که از فوم ساخته شده، دارای اتلی سخت با نگهدارندگی بالا بوده و قسمت جلویی آن دارای قطعه ای است که چانه را نگه داشته و قسمت پشتی بصورت منحنی و متناسب با آناتومی سر میباشد. گردنبند فیلادلفیا بخش های بیشتری از مهره های ستون فقرات گردنی را نسبت به گردنبند طبی سخت و نرم پوشش می دهد، بنابراین محدودیت حرکتی بیشتر و ثبات بیشتری را اعمال می کند. این محصول در دو مدل تولید می شود. مدل های ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ دارای سازگاری با MRI میباشد و مدل ۱۱۰۱ دارای یک دهانه برای دسترسی و انجام تراکستومی میباشد و به متخصصان اجازه می دهد که به سرعت به نبض شاهرگی دسترسی داشته باشند تا در مواقع اضطراری در حالیکه عمل تراکستومی یا جراحی بر روی نای انجام میدهند، گردن را بدون حرکت نگهدارند.



Posture Brace W/Steel Stay

Two
Flexible Stays
Code: 3101




- پیکربندی مثلی شکل این محصول به درستی فشار را به نوک شانه تقسیم می کند.
- بند های ضربداری شکل محصول حمایت بیشتری را فراهم می کند و تنظیم محصول را آسان می سازد.
- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.

مواد سازنده:


نئوپرن، نایلون، کتان، پلی استر، استیل

جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

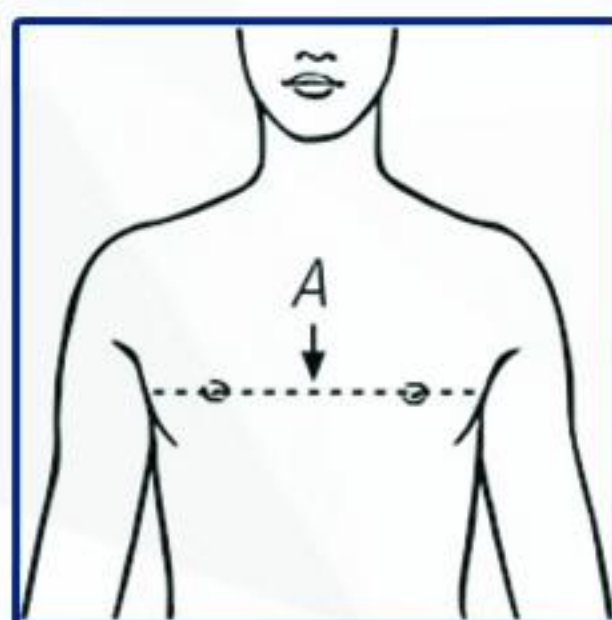

الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.

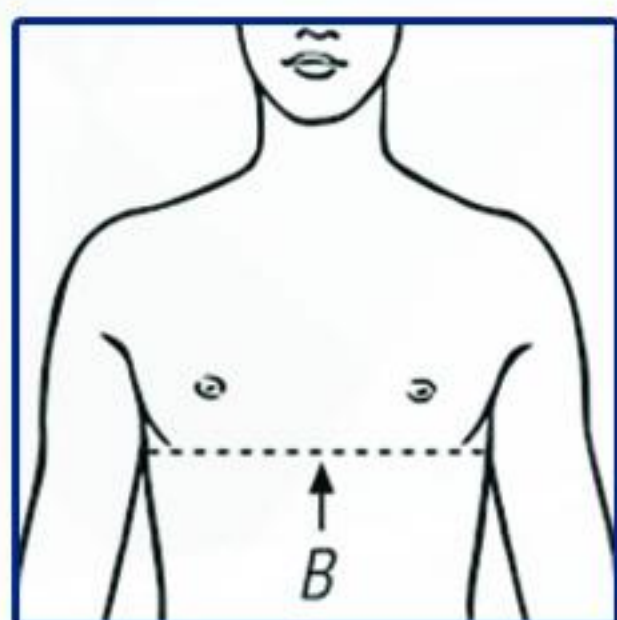

ب = بانوان: دور سینه را از زیر سینه اندازه گیری نمایید.

S	64-74 cm (25.20-29.13")	XL	94-104 cm (37.01-40.94")
M	74-84 cm (29.13-33.07")	2XL	104-114 cm (40.94-44.88")
L	84-94 cm (33.07-37.01")	3XL	114-124 cm (44.88-48.81")

نام محصول:

کتف قوز بند آتل دار نئوپرنی

مشخصات:

کتف قوزبند کیورد برای کمک به درمان کایفوز و قوزی در مراحل اولیه ابتلا، از طریق ایجاد توازن و تعادل صحیح ستون فقرات طراحی شده است. این محصول از خم شدن بیش از حد به جلو و انحنای ستون فقرات در قسمت فوقانی (سینه ای) به جلو، جلوگیری می کند. ایستایی و در عین حال انعطاف پذیری همراه با طراحی آناتومیک این محصول، به حمایت از ماهیچه ها، رباط ها و تاندون ها کمک میکند و وضعیت بدنی را در حالت طبیعی حفظ میکند. همچنین این محصول می تواند با حمایت از بافت های نرم و توزیع یکنواخت نیرو در ناحیه ستون فقرات، به کاهش درد و اسپاسم عضلانی کمک کند. این محصول قابل تنظیم است و می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.

موارد استفاده:

- افتادگی شانه ها
- خمیدگی پشت
- ضعف عضلات کتف
- نگهداری ستون فقرات در وضعیت صحیح

ویژگی ها:

- آتل های استیل انعطاف پذیر بکار رفته در این محصول به تقویت توازن قسمت فوقانی ستون فقرات و حفظ وضعیت مناسب کمک می کند و از خمیدگی جلوگیری می کند.



Clavicle Brace

Adjustable Fit
Code: 3301




مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، فلز، فوم، کتان، ابر

جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

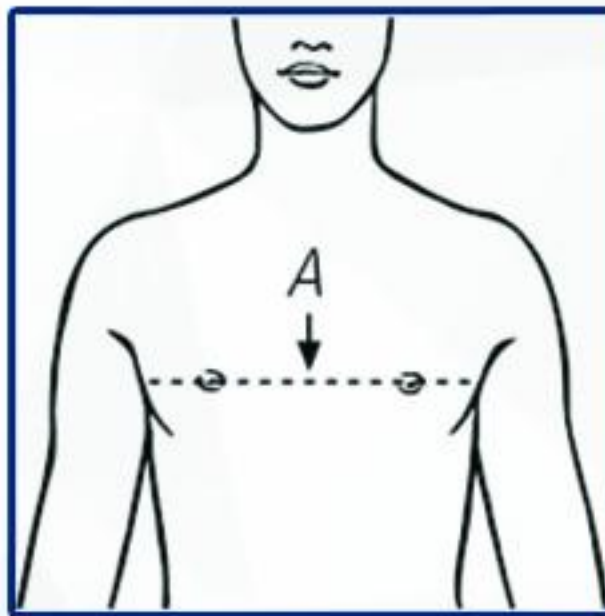

الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.

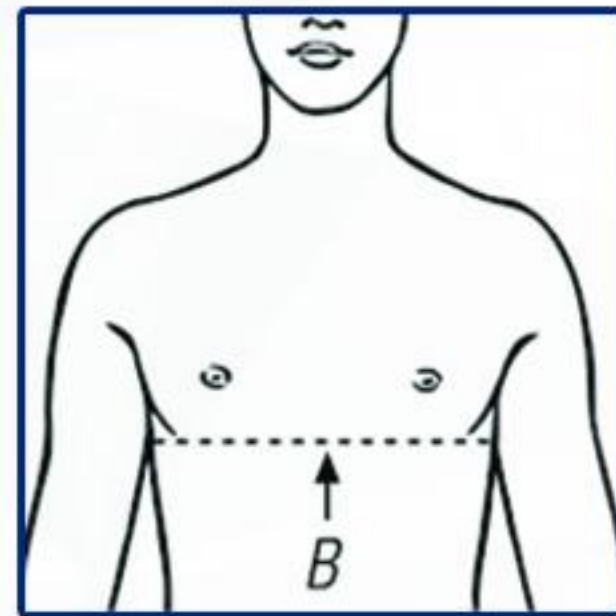

ب = بانوان: دور سینه را از زیر سینه اندازه گیری نمایید.

S 65-80 cm (5.59-31.49")

XL 110-125 cm (43.30-49.21")

M 80-95 cm (1.49-37.40")

2XL 125-140 cm (49.21-55.11")

L 95-110 cm (37.4-43.30")

نام محصول:

بانداژ ترقوه

مشخصات:

بانداژ ترقوه کیورد یک حمایت کننده و نگهدارنده کاربردی و بسیار راحت ترقوه است. ساختار آن بگونه ای است که پس از بسته شدن، شانه ها را به سمت عقب می کشد تا شکستگی استخوان ترقوه را هم تراز کند و وضعیت حمایتی مورد نیاز را ایجاد کند. یک حلقه فلزی در بخش عبور بندها در قسمت پشتی قرار گرفته است و وضعیت متناسب آناتومیک را پس از پوشیدن محصول ایجاد می کند. این ساختار به بیمار این امکان را می دهد تا حتی در حالت خوابیده نیز احساس راحتی کند.

موارد استفاده:

- بعد از شکستگی استخوان ترقوه
- محافظت بعد از عمل جراحی
- ضعف عضلات کتف

ویژگی ها:

- از فوم سبک و بادوام با پوشش پارچه تنفسی ساخته شده است.
- دارای بندهای شانه ای پهن با پدهای شانه ای که بیحرکتی مناسب را فراهم و راحتی بیمار را افزایش می دهد.
- دارای بندهای چسبی زبر و نرم برای تنظیم آسان.
- بند چسبی پشتی برای کنترل سفتی و تنظیم ارتفاع با حرکت پایین به بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
- مناسب برای بزرگسالان و کودکان.



Abdominal Binder

W/Compression Strap

Used in Hospitals
Code: 4202




- کش ساپورتی، فشرده سازی اضافی را فراهم می کند.
- ارتفاع محصول ۲۵۰ میلی متر است.
- طراحی عمومی مناسب برای مردان و زنان.

مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور شکم و کمر خود را اندازه بگیرید.

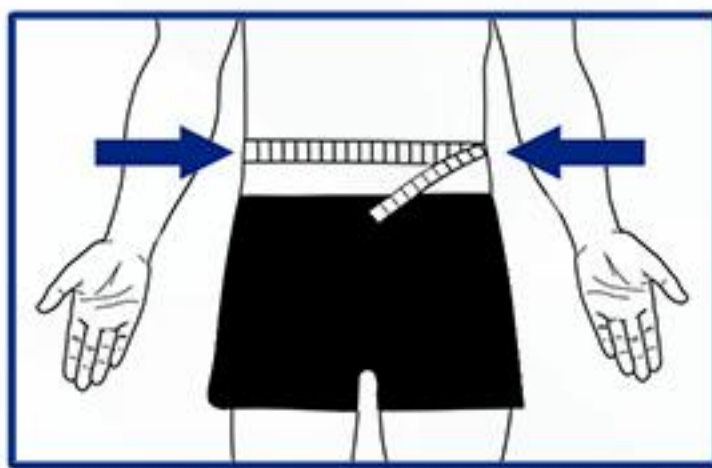

S 70-80 cm (27.56-31.50")	2XL 110-120 cm (43.31-47.24")
M 80-90 cm (31.50-35.43")	3XL 120-130 cm (47.24-51.18")
L 90-100 cm (35.43-39.37")	4XL 130-140 cm (51.18-55.12")
XL 100-110 cm (39.37-43.31")	5XL 140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی

مشخصات:

شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد برای کاهش کشیدگیهای لیگامانی در حرکات خمشی و پیچشی به جلو و عقب طراحی شده است. این محصول، برای استفاده پس از جراحی ایده آل است. بادوامی، انعطاف پذیری و کشسانی، به گرم کردن ماهیچه های گرفته، دردناک و خسته کمک می کند و می تواند به کاهش اسپاسم عضلانی در کشیدگی های حاد یا رگ به رگ شدن کمر از طریق حمایت قابل تنظیم کمک نماید. سوراخهای کش تنفسی جریان هوای عالی را برای کاهش تعریق فراهم می کند و کش دوبل محصول امکان تنظیم حمایت را از کم تا زیاد فراهم می کنند.

موارد استفاده:

- بعد از عمل جراحی در ناحیه شکمی
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- بعد از زایمان

ویژگی ها:

- خستگی و فشار عضلانی را کاهش می دهد.
- ایده آل برای استفاده پس از جراحی.
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید
- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- کش قابل تنفس و توری برای کاهش تعریق.
- کش های ساپورتی حمایت قابل تنظیم را از کم تا زیاد فراهم می کنند.



Neoprene Waist Trimmer

Code: 4101




- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- طراحی عمومی مناسب برای مردان و زنان.

مواد سازنده:

نئوپرن، کتان، نایلون، پلی استر

جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

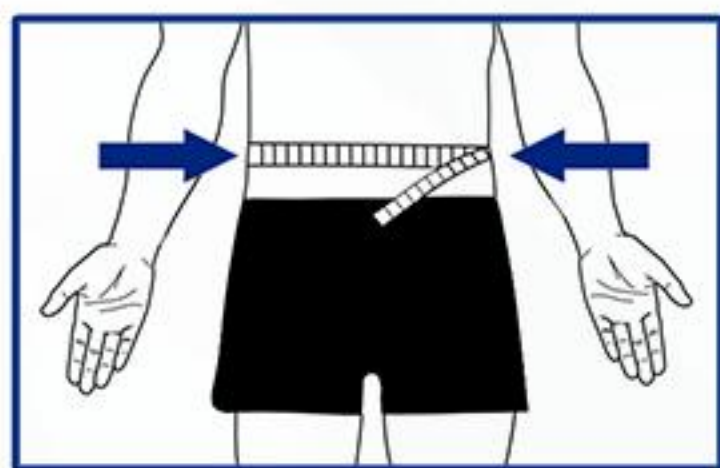

S 70-80 cm (27.56-31.50")	2XL 110-120 cm (43.31-47.24")
M 80-90 cm (31.50-35.43")	3XL 120-130 cm (47.24-51.18")
L 90-100 cm (35.43-39.37")	4XL 130-140 cm (51.18-55.12")
XL 100-110 cm (39.37-43.31")	5XL 140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

شکم بند نئوپرنی

مشخصات:

شکم بند نئوپرنی کیورد برای کاهش کشیدگیهای لیگامانی در حرکات خمشی و پیچشی به جلو و عقب طراحی شده است. این محصول، برای استفاده پس از جراحی ایده آل است. بادوامی، انعطاف پذیری و کشسانی، به گرم کردن ماهیچه های گرفته، دردناک و خسته کمک می کند و می تواند به کاهش اسپاسم عضلانی در کشیدگی های حاد یا رگ به رگ شدن کمر از طریق حمایت قابل تنظیم کمک نماید.

موارد استفاده:

- جلوگیری از افتادگی شکم.
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید.
- بعد از جراحی در ناحیه شکمی.

ویژگی ها:

- سبک و راحت.
- قابل شستشو.
- متناسب با ناحیه شکمی.
- استفاده از مواد سازنده باکیفیت.
- قابلیت تنظیم راحت بر روی شکم.
- خستگی و فشار عضلانی را کاهش می دهد.
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید.

Spine Lumbar



Low Profile Industrial Back Support

w/Shoulder
Straps
Code: 5203




مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

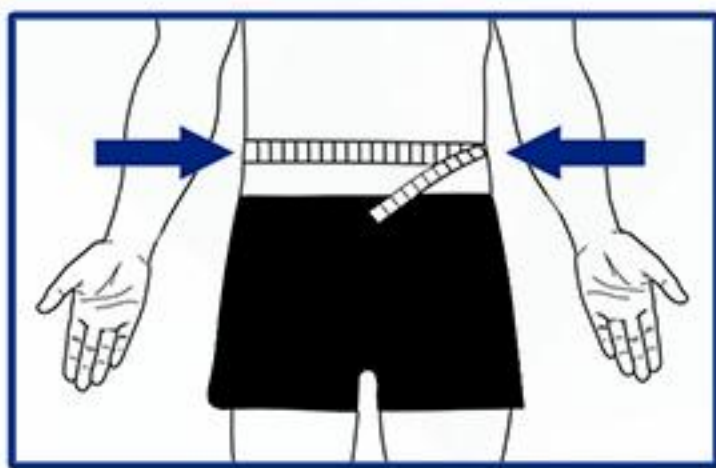

S 70-80 cm (27.56-31.50") **2XL** 110-120 cm (43.31-47.24")

M 80-90 cm (31.50-35.43") **3XL** 120-130 cm (47.24-51.18")

L 90-100 cm (35.43-39.37") **4XL** 130-140 cm (51.18-55.12")

XL 100-110 cm (39.37-43.31") **5XL** 140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

کمر بند کار با استرپ شانه ای الاستیک

مشخصات:

کمر بند کار با استرپ شانه ای کیورد حداکثر سطح پشتیبانی را برای کمر شما فراهم می کند. این کمر بند دارای کش های جانبی محکم است که ایجاد فشار قابل تنظیم و حمایت از کمر را فراهم می سازد. طراحی خاص این محصول به شما این امکان را می دهد که بدون احساس ناراحتی تمام بدن خود را حرکت دهید. این کمر بند، نگهدارنده مناسب کمر هنگام ورزش و کار سخت بوده و حمایت و ایستایی لازم را فراهم می کند.

موارد استفاده:

- حمایت از قسمت پایینی کمر طی انجام فعالیت های سنگین
- محافظت از مهره ها و دیسک کمر در طول انجام کار
- درد های کمر به دلیل نشستن ها و ایستادن های مدام
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن

ویژگی ها:

- دارای سه آتل انعطاف پذیر در پشت جهت حمایت و ثبات بیشتر.
- می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.
- به تسکین درد کمر کمک می کند.
- به راحتی قابل استفاده است.

Spine Lumbar



Sacro Lumbar Belt

w/Power Straps

Four Splints

Code: 5204(27cm)

Code: 5205(30cm)

نام محصول:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی ۲۷/۳۰ سانتی متر با کش ساپورتی

مشخصات:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف پذیر و کش ساپورتی است. این کمر بند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برند ایده آل است. مواد بادوام، قابل تنفس، انعطاف پذیر با قابلیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.

موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلولولیسستزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پستی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم میکند.


- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پستی کمر بند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمر بند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاهتر و آناتومیک شده است.

مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

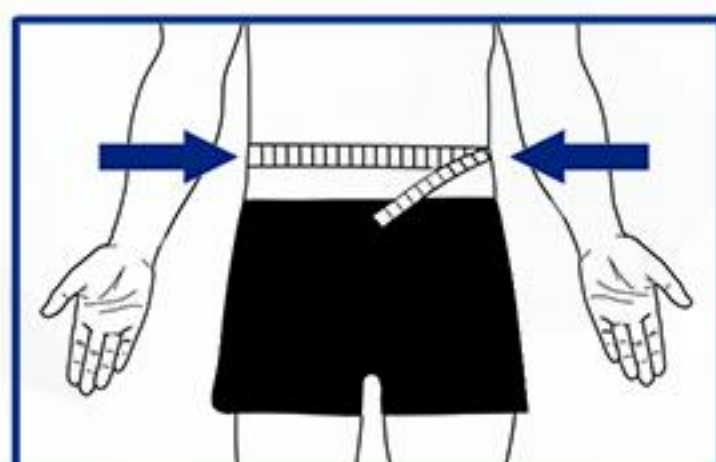

S 70-80 cm (27.56-31.50") **2XL** 110-120 cm (43.31-47.24")

M 80-90 cm (31.50-35.43") **3XL** 120-130 cm (47.24-51.18")

L 90-100 cm (35.43-39.37") **4XL** 130-140 cm (51.18-55.12")

XL 100-110 cm (39.37-43.31") **5XL** 140-150cm (55.12-59.06")

Spine Lumbar



General LSO Flex

W/1:6 Pulley System
Compression

Corset offers
6:1 compression
and control
from L1 to S1.
Code: 5301




- فقط توسط یک دستگیره، امکان تنظیم آسان و سریع را فراهم می کند و مناسب برای بیماران مبتلا به آرتروز می باشد.
- طراحی با مقیاس دقیق، حمایت و کنترل قابل تنظیم.
- ساختاری قابل تنفس، قابل شستشو و بدون فلز
- مناسب برای تصویربرداری پزشکی

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پی وی سی

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

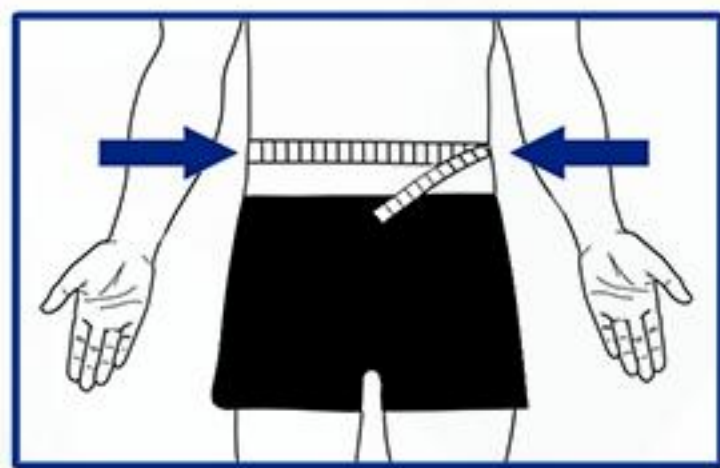

S 70-80 cm (27.56-31.50")	2XL 110-120 cm (43.31-47.24")
M 80-90 cm (31.50-35.43")	3XL 120-130 cm (47.24-51.18")
L 90-100 cm (35.43-39.37")	4XL 130-140 cm (51.18-55.12")
XL 100-110 cm (39.37-43.31")	5XL 140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

کمر بند جنرال لومبوساکرال با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱:۶

مشخصات:

کمر بند جنرال لومبوساکرال ساپورت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱ به ۶ کیورد به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمر بند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر می باشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بدن بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتا باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های منحصر به فرد بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این بریسهها بسیار محکم تر می باشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مکانیکی می باشد.

موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- اسپوندیلوز و اسپوندیلولیسیتیزس
- تنگی کانال نخاعی

ویژگی ها:

- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفته ۱:۶ ایجاد فشار و محدودیت حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند.



1:6 Pulley System

6X



**Pro
LSO Flex**
W/1:6 Pulley System
Compression 23/30cm

Corset offers 6:1
compression and
control from L1 to S1.
Code: 5302

نام محصول:

کمربند پروفشنال لومبوساکرال ۲۳/۳۰ سانت با فشار قابل تنظیم
قرقره ای ۱:۶

مشخصات:

کمربند پروفشنال لومبوساکرال ساپورت سخت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱ به ۶ به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر میباشد. این قابلیت بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بدن بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتاً باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های منحصر به فرد بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمربند ها بسیار محکم تر میباشد و این باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- جابجایی دیسک کمر، فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی
- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکتومی
- اسپوندیلوز و اسپوندیلولولیستریس

ویژگی ها:


- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفته ۱:۶ ایجاد فشار و محدودیت حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند و ایجاد فشار داخل شکمی را با حداقل تلاش فراهم می کند.
- فقط توسط یک دستگیره، امکان تنظیم آسان و سریع با یک دست را فراهم میکند.
- ساختاری قابل تنفس، قابل شستشو و بدون فلز.
- دارای پنل پشتی قابل جداسازی و قابل شستشو در دو ارتفاع: ۲۳ سانتی متر (۹،۰۶ اینچ)، ۳۰ سانتی متر (۱۱،۸۱ اینچ) و مناسب برای تصویربرداری پزشکی

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پی وی سی

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید

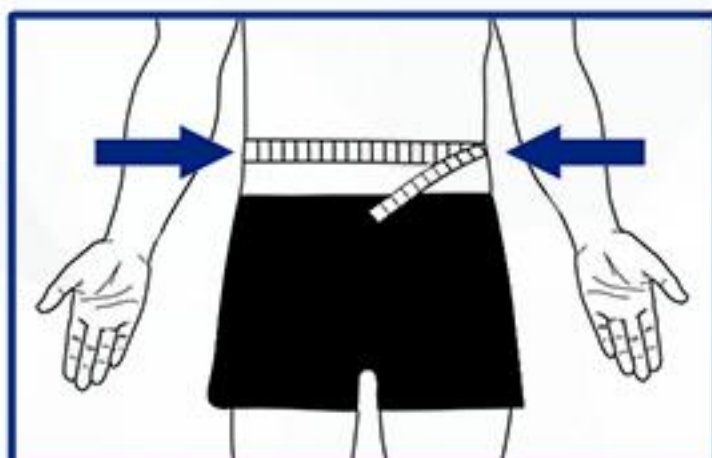

S 70-80 cm (27.56-31.50") **2XL** 110-120 cm (43.31-47.24")

M 80-90 cm (31.50-35.43") **3XL** 120-130 cm (47.24-51.18")

L 90-100 cm (35.43-39.37") **4XL** 130-140 cm (51.18-55.12")

XL 100-110 cm (39.37-43.31") **5XL** 140-150cm (55.12-59.06")

Spine Lumbar



Expert LSO Flex
W/1:6 Pulley System
Compression 23/30cm

Corset offers 6:1
compression and
control from L1 to S1
Code: 5303

1:6 Pulley System

6X



نام محصول:

کمر بند اکسپرت لومبوساکرال ۲۳/۳۰ سانت با فشار قابل تنظیم
قرقره ای ۱:۶

مشخصات:

این محصول به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمر بند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ میباشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتاً باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمر بندها بسیار محکم تر میباشد و این باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پدهای طرفین و پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- جابجایی دیسک کمر، فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی
- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکتومی
- اسپوندیلوز و اسپوندیلولیتیزیس

ویژگی ها:

- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفته ۱:۶ ایجاد فشار و محدودیت


- حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند.
- فقط توسط یک دستگیره، تنظیم آسان و سریع این کمر بند امکانپذیر است.
- این محصول با دستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.
- پنل پشتی قابل جداسازی و قابل شستشو در دو ارتفاع: ۲۳cm (۹،۰۶ اینچ)، ۳۰cm (۱۱،۸۱ اینچ).
- پنلهای خلفی فرم پذیر و قابل شستشو علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی در طرفین از ایجاد فشار نقطه ای در پهلوها جلوگیری میکنند.
- پنل شکمی بیرونی پددار به این مدل اضافه شده است.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پلی پروپیلن، پی وی سی

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

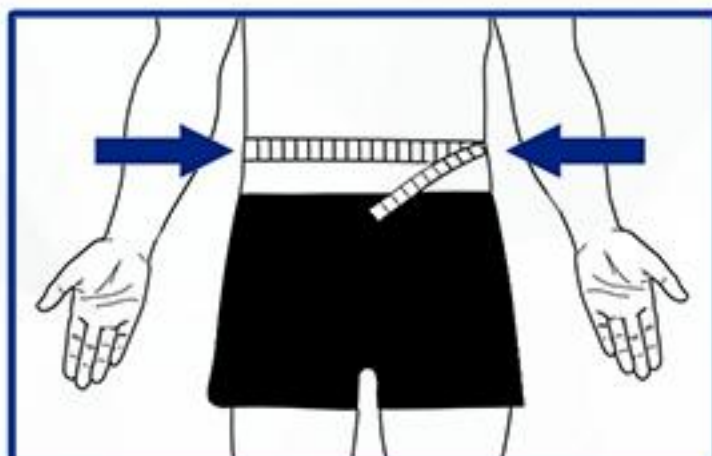

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (35.43-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")



1:6 Pulley System

6X

Expert Rigid LSO Brace

w/1:6 Pulley System Compression

Corset offers 6:1 compression and control from T9 to S1
Code: 5304

نام محصول:

بریس لومبوساکرال سخت اکسپرت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱:۶

مشخصات:

بریس لومبوساکرال سخت اکسپرت با سیستم پیشرفته قرقره ای ۱ به ۶ از ساختار مفصلی ستون فقرات در مهره‌های لگنی، کمری حمایت مینماید این کمربند طبی حرکت در ستون فقرات را از ناحیه T9 (پشت) تا ساکروم S1 (پایین کمر) محدود مینماید و در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمربند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر میباشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود میشود. استرپ های بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمربندها بسیار محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پدهای طرفین و پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:

- کمر درد.
- کشیدگی/رگ به رگ شدن کمر.
- تنگی کانال نخاعی کمری.
- برآمدگی دیسک.
- اسپوندیلولیتیزیس.
- جابجایی دیسک و فتق دیسک

- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکتومی.
- درمان قبل و بعد از جراحی.

ویژگی ها:


- این محصول بادستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.
- پنلهای پشتی، خلفی و شکمی، پد دار بوده و قابل جداسازی و شستشو میباشدند و علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی از ایجاد فشار نقطه ای جلوگیری میکنند.
- پنل پشتی را میتوان با تجویز پزشک و جهت تناسب بهتر با هر بیمار همزمان با حرارتی دهی به فرم دلخواه تغییر داد.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PE، PE، PVC

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

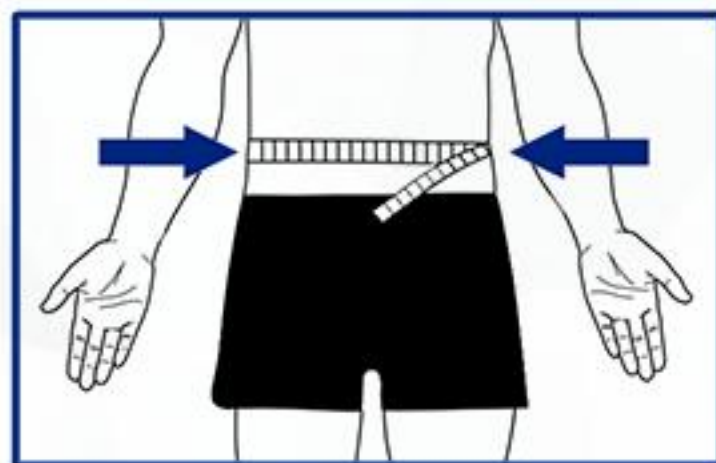

S 70-80 cm (27.56-31.50") **2XL** 110-120 cm (43.31-47.24")

M 80-90 cm (31.50-35.43") **3XL** 120-130 cm (47.24-51.18")

L 90-100 cm (35.43-39.37") **4XL** 130-140 cm (51.18-55.12")

XL 100-110 cm (39.37-43.31") **5XL** 140-150cm (55.12-59.06")

Spine Thoracic & Lumbar



Expert Rigid TLSO Brace w/1:6 Pulley System Compression

Corset offers 6:1
compression and
control from T3 to S1
Code: 5405



- جابجایی دیسک و فتق دیسک
- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکتومی
- درمان قبل و بعد از جراحی

ویژگی ها:


- این محصول با دستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.
- پنلهای پشتی، خلفی و شکمی، پد دار بوده و قابل جداسازی و شستشو میباشدند و علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی از ایجاد فشار نقطه ای جلوگیری میکنند.
- پنل پشتی را میتوان با تجویز پزشک و جهت تناسب بهتر با هر بیمار همزمان با حرارتی دهی به فرم دلخواه تغییر داد.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PE، PE، PVC

جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.

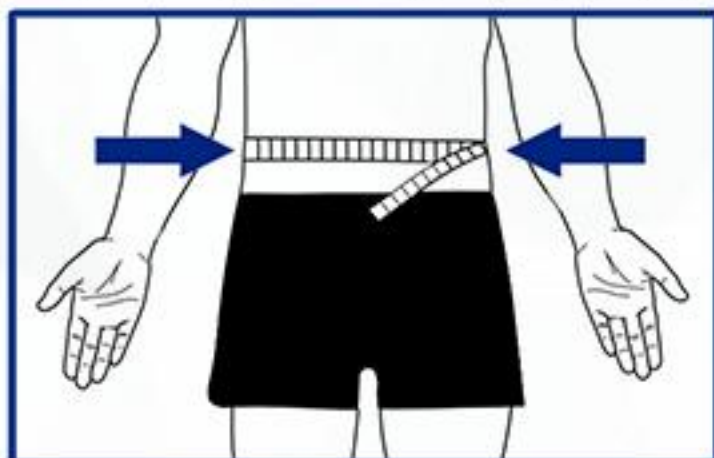

S	70-80 cm (27.56-31.50")	2XL	110-120 cm (43.31-47.24")
M	80-90 cm (31.50-35.43")	3XL	120-130 cm (47.24-51.18")
L	90-100 cm (35.43-39.37")	4XL	130-140 cm (51.18-55.12")
XL	100-110 cm (39.37-43.31")	5XL	140-150cm (55.12-59.06")

نام محصول:

بریس تورا کولومبوسا کراک سخت اکسپرت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱:۶

مشخصات:

بریس تورا کولومبوسا کراک سخت اکسپرت با سیستم پیشرفته قرقره ای ۱ به ۶ از ساختار مفصلی ستون فقرات در مهره های لگنی، کمری و پشتی حمایت مینماید این کمر بند طبی حرکت در ستون فقرات را از ناحیه قفسه سینه T3 (میان پشته) تا ساکروم S1 (پایین کمر) محدود نموده و به گردن اجازه حرکت آزادانه می دهد. این محصول را می توان به صورت یک ارتز بلند ستون فقرات که از ناحیه مهره های سینه ای تا کمری را پوشش می دهد مورد استفاده قرار داد و در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمر بند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر میباشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیکی خود میشود. استرپ های بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمر بندها بسیار محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پدهای طرفین و پد پشتی کاهش دهد.

موارد استفاده:

- تنگی کانال نخاعی
- انحراف زیاد ستون فقرات (کایفوز)
- کشیدگی حاد در ناحیه لومبار و تورا سیک کمر



Maternity Support


Code: 6201

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، ابر

جدول سایز بندی:

دور شکم خود را اندازه بگیرید.

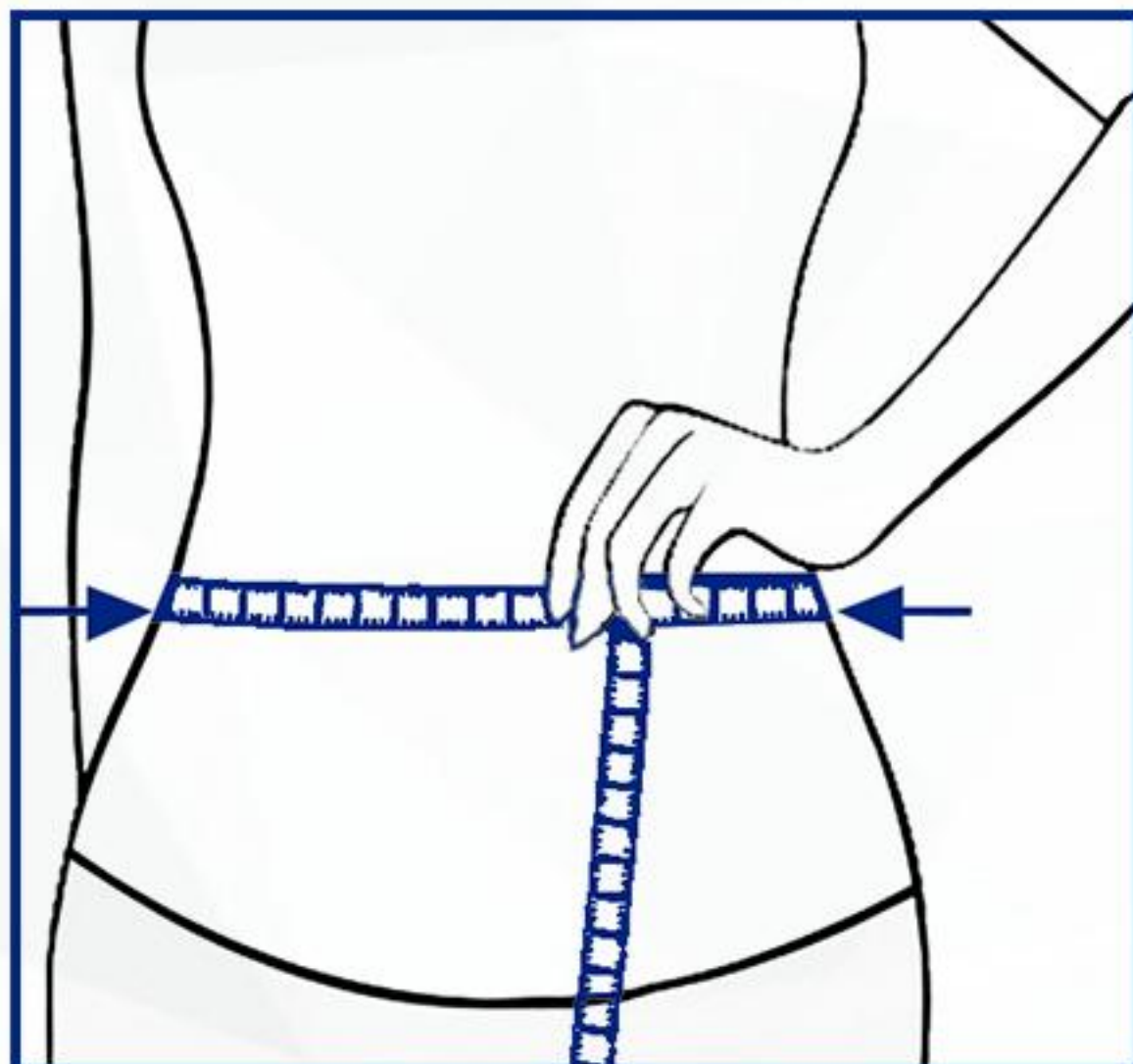

M

65-115 cm (25.60-45.27")

L

75-125 cm (29.13-33.07")

نام محصول:

کمر بند حاملگی یک تکه

مشخصات:

استفاده از این محصول در موارد زیر مناسب می باشد:

- درد عضلانی شکم زنان باردار.
- جنین زن باردار بیش از حد بزرگ باشد.
- یک ساپورت خارجی برای زنان باردار در زمانی که جنین حالت غیر طبیعی داشته باشد است.
- افتادگی شکم، احتمال ابتلا به زایمان زودرس و سقط جنین در زنان باردار.
- نگرانی در مورد افتادگی شکم، که بهبودی بعد از تولد نوزاد را در زنان باردار را تحت تاثیر قرار میدهد.
- بیماری واریس بارداری و تورم پا که بسیار برای زنان باردار خطرناک هستند.

موارد استفاده:

- دردهای مرتبط با بارداری در عضلات کمر، ساق پا و شکم را تسکین می دهد.
- کمک به کاهش دردهای لگنی در دوران بارداری.

ویژگی ها:

- از ناحیه کمر و لگن مراقبت می کند.
- کشش رباط های عضلانی زنان باردار را که ناشی از آویزان بودن شکم است، تسکین می دهد.
- کمک به کاهش کمردرد و حمایت از شکم در بارداری.
- در روی پوست احساس نرمی و راحتی را ایجاد میکند.
- با لیفت شکم زنان باردار به تسکین درد کمک می کند.
- قابل پوشیدن در زیر لباس روزانه

Spine Lumbar



Maternity Support Belt

Code: 6202



نام محصول:

کمر بند حاملگی دوتکه

مشخصات:

استفاده از این محصول در موارد زیر مناسب می باشد:

- درد عضلانی شکم زنان باردار.
- افتادگی شکم، احتمال ابتلا به زایمان زودرس و سقط جنین در زنان باردار.
- جنین زن باردار بیش از حد بزرگ یا حالت غیر طبیعی داشته باشد.
- نگرانی در مورد افتادگی شکم، که بهبودی بعد از تولد نوزاد در زنان باردار را تحت تاثیر قرار میدهد.
- واریس بارداری و تورم پا که بسیار برای زنان باردار خطرناک هستند

موارد استفاده:

- قبل و بعد از بارداری
- تسکین کمردرد مرتبط با بارداری
- دردهای مرتبط با بارداری در شکم و ساق پا و عضلات لگن را تسکین می دهد

ویژگی ها:

- با لیفت شکم به تسکین درد کمک می کند.
- استرپ الاستیک مورب اضافی در قسمت جلو باعث حفظ موقعیت کمر بند پشتی میشود و هنگام استفاده راحت و نامحسوس است.
- دو تیکه ساخته شده، که برای سازگاری با رشد شکم در طول بارداری کاملاً قابل تنظیم میباشد.
- دارای دو آتل در قسمت پشت بوده که حمایت اضافی در ناحیه کمر را ایجاد می کنند و کمر بند را در موقعیت

- خود نگه داشته و از لوله شدن آن جلوگیری می کند.
- حمایت ملایم با حداکثر راحتی بدون فشار نامطلوب را فراهم می کند.
- به کاهش کمردرد کمک می کند و از شکم حمایت می کند.

- ساخته شده از کش سبک و پارچه لمینت شده بادوام، که این مواد در تماس با پوست احساس نرمی را ایجاد می کنند


مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، ابر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.

S	61.5-78.5cm (24.21-30.90")
M	71.5-88.5 cm (28.15-34.84")
L	81.5-98.5 cm (32.08-38.78")
XL	91.5-108.5 cm (36.02-42.71")
2XL	101.5-118.5 cm (39.96-46.65")

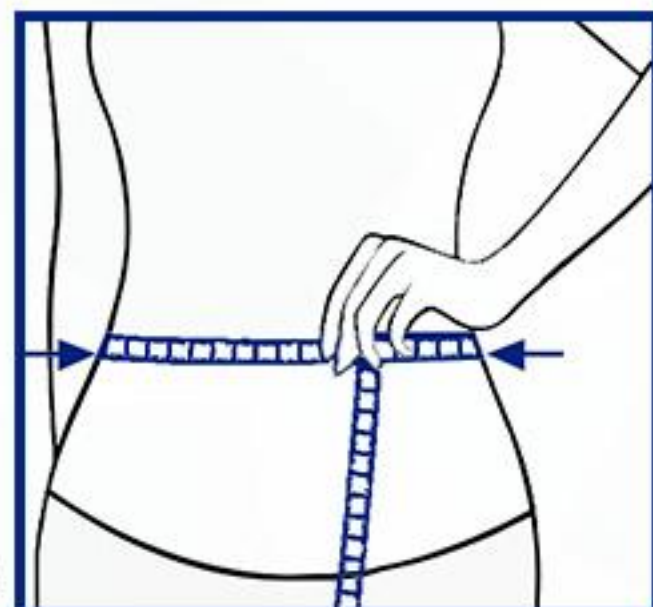

اندام فوقانی


اندام زیرین یا اندام فوقانی که در اصطلاح عامیانه به آن بالاتنه گفته می‌شود در کالبدشناسی عبارت است از هر دو مجموعه چپ و راست شانه، بازو، زیر بغل، آرنج، ساعد و دست. اندام فوقانی شامل استخوان‌های:

از استخوان‌های اندام فوقانی می‌توان به ترقوه (**Clavicle**)، کتف (**Scapula**)، استخوان بازو (**Humerus**)، زند زیرین (**Radius**)، زند زیرین (**Ulna**)، استخوان‌های مچ دست (**Carpal bones**)، استخوان‌های کف دست، استخوان‌های انگشتان دست اشاره کرد.

استخوان‌های مچ دست (**Carpal bones**): ناحیه مچ دست از هشت قطعه استخوان، موسوم به استخوان‌های کارپال ساخته شده است. استخوان‌های مچ دست که بر اساس شکلشان نامگذاری شده اند در دو ردیف بالایی و پایینی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

استخوان‌های کف دست (**Metacarpal Bones**): در هر دست پنج استخوان کف دستی (مِتاکارپال) وجود دارد. استخوان‌های کف دست به ترتیب از سمت شست به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می‌شوند. (دست در وضعیت آناتومیک قرار دارد)

بندهای انگشتان (**Phalanges**): اولین انگشت (شست) دو بند دارد، بقیه انگشتان دست هر کدام سه بند دارند. تعداد کل استخوان‌های انگشتان هر دست چهارده قطعه است.

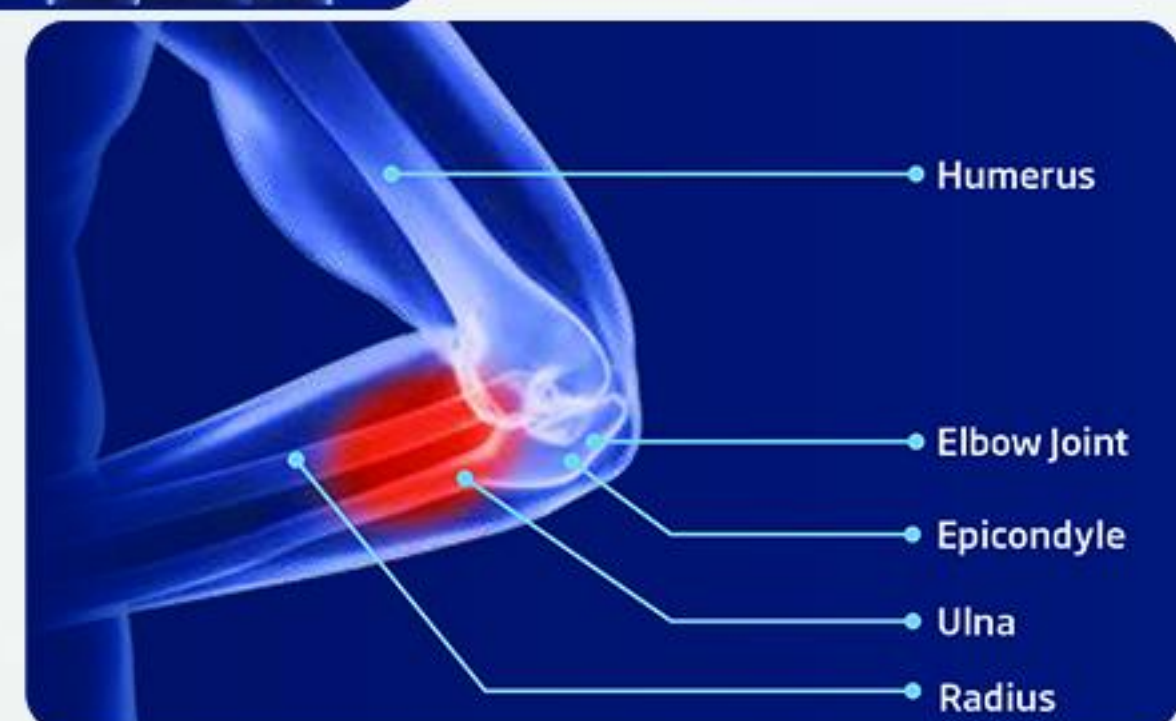

Shoulder Support



Arm Sling

Breathable
Fabric
Code: 7331



- زاویه آرنج قابل تنظیم.
- سگک جانبی برای تنظیم ارتفاع مناسب.
- مواد سبک و راحت.
- طراحی متناسب با بازوی راست و چپ.

مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

XS	15.2-20.3cm (6 - 8")
S	20.3-25.4cm (8-10")
M	25.4-30.5cm (10-12")
L	30.5-35.6cm (12-14")
XL	35.6-39.4cm (14-15.5")

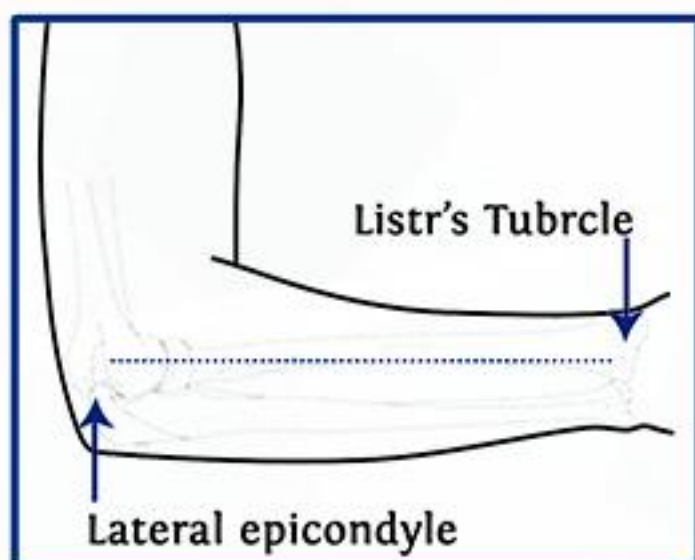

نام محصول:

آویز دست شانه ای (با ترمز شست)

مشخصات:

آویز دست کیورد یک محصول راحت و سبک وزن است که برای کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه دست راست یا چپ استفاده شود. این محصول طی توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است و به جلوگیری از فشار بیش از حد رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف کمک می کند. این محصول به تسکین درد ناشی از التهاب کیسه بورس و سندرم اینپینجمنت شانه کمک کرده و با تثبیت ساعد، به نحوه صحیح قرار گیری مفصل شانه در جهت بهبودی کمک می کند.

موارد استفاده:

- صدمات عصب براکیال
- دررفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب کیسه بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت (تحت فشار قرار گرفتن ناخواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

ویژگی ها:

- ترمز شست داخل بدنه آویز دست، از خستگی دست شما جلوگیری می کند.
- بندهای شانه ای پد دار برای راحتی بیمار.



Upper Extremity



Ultra Arm Sling

Breathable
Fabric
Code: 7302



- بند شانه ای قابل تنظیم با پد شانه ای، امکان استفاده راحت و قابلیت تنظیم را به کاربر می دهد.
- تولید شده با مواد سبک وزن راحت و قابل تنفس.
- طراحی یونیورسال متناسب با بازو راست یا چپ.
- استرپ کمربندی موجب تثبیت بهتر شانه و بازو در راستای بدن میشود.

مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

XS	15.2-20.3cm (6 - 8")
S	20.3-25.4cm (8-10")
M	25.4-30.5cm (10-12")
L	30.5-35.6cm (12-14")
XL	35.6-39.4cm (14-15.5")

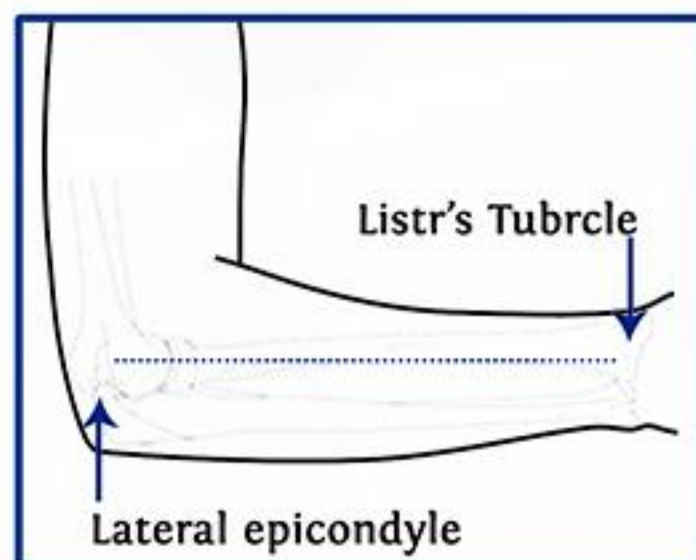

نام محصول:

ثابت کننده شانه و بازو (با استرپ کمربندی ثابت کننده)

مشخصات:

ثابت کننده شانه و بازو با استرپ کمربندی کیورد یک حمایت کننده راحت و سبک می باشد که از پارچه قابل تنفس ساخته شده است و می توان از آن برای آسیب های بازو/شانه راست یا چپ استفاده کرد. این محصول با تثبیت شانه و بازو و ساعد در مقابل بدن موجب قرار گیری صحیح مفاصل شانه و بازو شده که با جلوگیری از فشار بیش از حد بر روی رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف به تسکین درد ناشی از بورسیت و سندرم گیرافتادگی شانه و درمان کمک می کند. این محصول با بیحرکت کردن مفاصل شانه و بازو و ایجاد موقعیت مطلوب، به بهبودی مفاصل کمک میکند و طی دوره توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است.

موارد استفاده:

- صدمات شبکه براکیال (بازویی) و دررفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت (تحت فشار قرار گرفتن ناخواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو و محافظت بعد از عمل جراحی

ویژگی ها:

- کمک به بیحرکت کردن و ساپورت شانه و بازوی رگ به رگ شده، شکسته و پس از جراحی.
- ترمز دست داخل آویزدست از خسته شدن دست داخل آویزدست جلوگیری می کند.

Shoulder Support



Universal Shoulder Immobilizer

Adjustable Fit
Code: 7303



ویژگی ها:


- بازو را در کنار بدن محکم می کند و تحرک شانه و بالای بازو را برای جدا شدن، دررفتگی، کشیدگی و سایر آسیب ها محدود می کند.
- برجسبهای زبر و نرم این محصول قابلیت تنظیم در محل مورد نظر را فراهم میسازد.
- طراحی متناسب با بازوی راست یا چپ

مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، کتان

جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

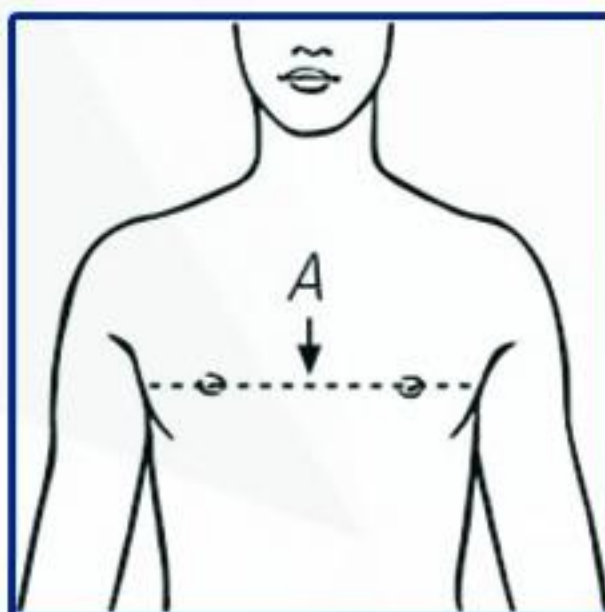

الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.

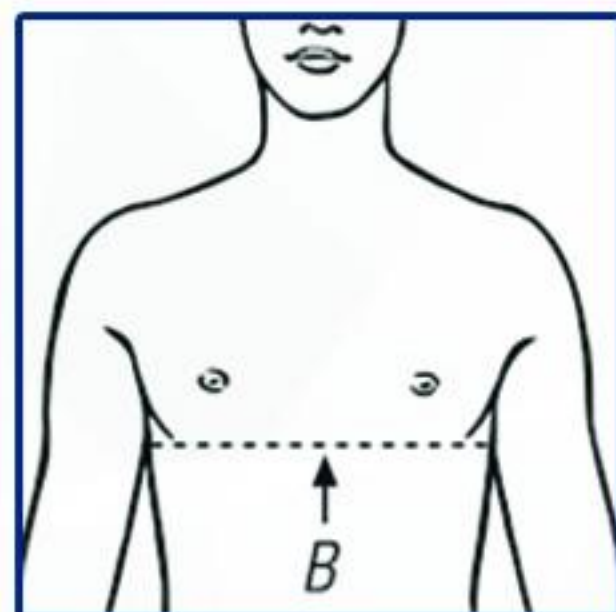

ب = بانوان: دور سینه را از زیر سینه اندازه گیری نمایید.

S 60.96-91.44cm (24-36")

L 91.44-121.92cm (36-48")

M 76.20-106.68cm (30-42")

XL 106.68-137.16cm (42-54")

نام محصول:

ثابت کننده شانه و بازو با بند شانه ای (Swathe & Sling)

مشخصات:

تثبیت کننده شانه و بازو کیورد وسیله ای به جهت حمایت حداکثری از شانه و بازو بوده که با تثبیت ساعد و بازو در مقابل تنه، تمامی حرکات ناخواسته شانه، ترقوه و بازو را محدود میکند. از این محصول می توان برای آسیب دیدگی شانه سمت راست یا چپ استفاده نمود. عملکرد این محصول ایجاد بیحرکتی در مفاصل شانه است تا از این طریق شرایط بهبود مفصل و بافت نرم را فراهم آورد. این محصول برای آسیبهای روتاتور کاف، بورسیت و درد ناشی از ابداکشن مناسب است چراکه حرکت بیش از حد مفصل را کاهش می دهد. این محصول همچنین استرس را در کل مجموعه شانه از بین می برد و با تثبیت ساعد در برابر بدن، هم راستایی مناسب مفصل را برای بهبودی تسهیل می کند و از این طریق به توانبخشی فرد آسیب دیده کمک میکند.

موارد استفاده:

- صدمات شبکه براکیال (بازویی)
- دررفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت (تحت فشار قرار گرفتن نا خواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی
- شکستگی قسمت اکرومیون استخوان کتف



Shoulder Support



Shoulder Abduction Orthosis

Code: 7308



• استریپهای قابل تنظیم پوشیدن محصول را تسهیل میکنند.


• استفاده از مواد اولیه سبک وزن و راحت.

مواد سازنده:

فوم TDI، پلی استر، نایلون، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

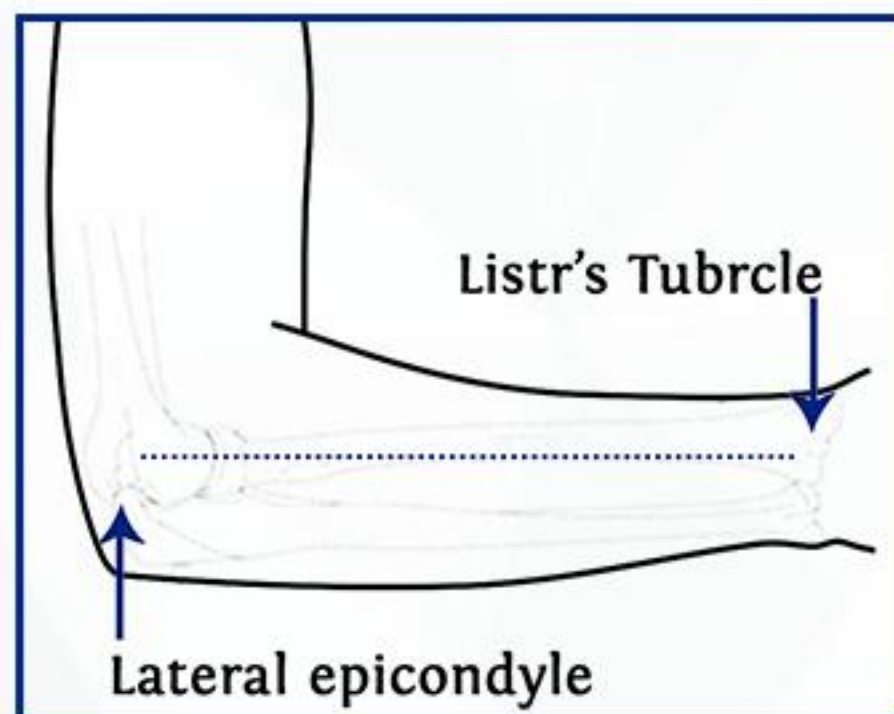

S

20.3-25.4cm (8-10")

M

25.4-30.5cm (10-12")

L

30.5-35.6cm (12-14")

نام محصول:

دور کننده شانه ۳۰-۴۵ درجه

مشخصات:

دور کننده شانه کیورد یک محصول راحت و سبک است. این محصول برای کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه راست یا چپ استفاده شود. این محصول در دوران توانبخشی و بهبودی پس از عمل مفید است. از کشیدگی بیش از حد رباطها، تاندونها و ماهیچهها از جمله گروه روتاتور کاف جلوگیری می کند و به تسکین درد ناشی از بورسیت و بیماری های شانه کمک می کند. همچنین با تثبیت ساعد، زاویه صحیح مفصل را برای بهبودی ایجاد می کند.

موارد استفاده:

- صدمات شبکه براکیال (بازویی)
- دررفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

ویژگی ها:

- ترمز شست از خستگی دست شما جلوگیری میکند.
- بازو را حمایت و ساپورت می کند و وزن را به قسمت پشت و شانه انتقال میدهد.
- طراحی متناسب با بازوی راست و چپ.

Shoulder Support



Shoulder Support

Warmth & Compression
Code: 7101




مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، نئوپرن، کتان

جدول سایز بندی:

بالای بازوی خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

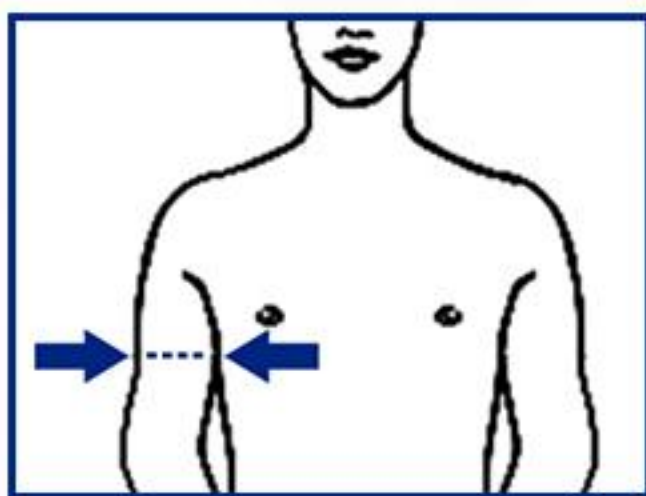

S 22-26 cm (8.66-10.24")

M 26-30 cm (10.24-11.81")

L 30-34 cm (11.81-13.39")

XL 34-38 cm (13.39-14.96")

2XL 38-42 cm (14.96-16.54")

3XL 42-46 cm (16.54-18.11")

نام محصول:

شانه بند قابل تنظیم نئوپرنی

مشخصات:

مفصل شانه از فعال ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن می باشد. کپسول و رباط ها به عنوان ثبات دهنده عمل می کنند، در حالیکه عضلات و تاندون ها در عملکرد فعال شانه نقش دارند. همکاری منظم مفاصل شانه، سبب ایجاد حرکات نرم شانه در تمام جهات می شود. مفصل شانه به دلیل آسیب های مستقیم در معرض بیماری های مختلفی قرار دارد. شانه بازوبند نئوپرنی کیورد، برای حمایت از مفصل شانه آسیب دیده، طراحی شده است. این محصول مفصل شانه را گرم و انعطاف پذیر نگه داشته و به شانه ورزشکار یا بیمار اجازه می دهد که به تدریج به دامنه حرکتی سابق بازگردند.

موارد استفاده:

- بی ثباتی شانه
- تندینیت روتاتور کاف
- بورسیت

ویژگی ها:

- سبک و راحت.
- حفظ گرما جهت تسکین درد.
- مناسب برای استفاده در زیر لباس.
- طراحی متناسب با شانه راست یا چپ.

Elbow Support



Elbow Support

Targeted Relief
Code: 8101



نام محصول:
آرنج بند نئوپرنی

مشخصات:

مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. کپسول مفصلی و رباط های متعددی جهت حمایت از این مفصل وجود دارد. در بیشتر کارهای روزمره و در بسیاری از ورزش ها (مانند ورزش های رزمی، والیبال، هندبال) این مفصل به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و دارای تحرک بالایی می باشد. آرنج بند کیورد بدون ایجاد محدودیت در حرکات آرنج، در طول فعالیت هایی که نیاز به حرکات گسترده دارند مانند فعالیت های ورزشی، از آرنج محافظت می کند. این محصول با حفظ گرما به درمان آسیب های خفیف مفصل آرنج کمک می کند. علاوه بر آن، درد و تورم ناشی از آرتروز و آسیب های ورزشی را کاهش می دهد.

موارد استفاده:

- اپی کندیلیت خارجی (آرنج تنیس بازان)
- اپی کندیلیت داخلی (آرنج گلف باز)
- تسکین درد و تورم ناشی از التهاب تاندونی یا بورسیت.
- حفظ گرما به منظور بهبود گردش خون در مفصل
- کشیدگی و رگ به رگ شدن آرنج.
- حمایت از عضلات ضعیف و آرنج ضعیف
- التهاب بورس اوله کرانون (التهاب آرنج)
- جلوگیری و درمان آسیب های خفیف ورزشی

ویژگی ها:


- سبک و راحت.
- همزمان با ساپورت، امکان حرکت کامل آرنج را طی فعالیت فراهم میسازد.
- محافظت از آرنج طی فعالیت های ورزشی.
- قابل استفاده برای هر دو دست راست و چپ.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، نئوپرن، کتان

جدول سایز بندی:

۵ سانتی متر (۲ اینچ) زیر مفصل آرنج، دور ساعد را اندازه بگیرید.

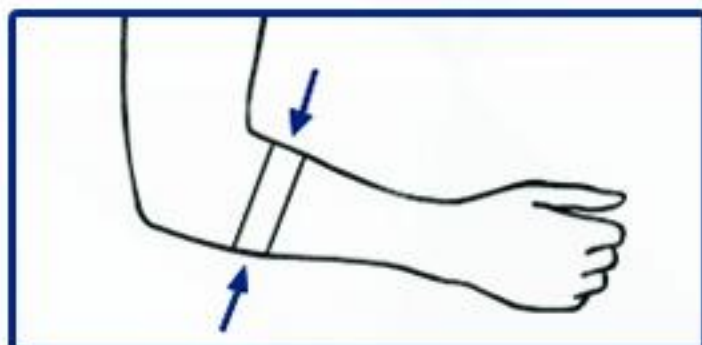

S 21-23cm (8.27-9.06")

M 23-25cm (9.06-9.84")


L 25-27cm (9.84-10.63")

XL 27-29cm (10.63-11.42")

2XL 29-31cm (11.42-12.20")

3XL 31-33cm (12.20-12.99")

Elbow Support

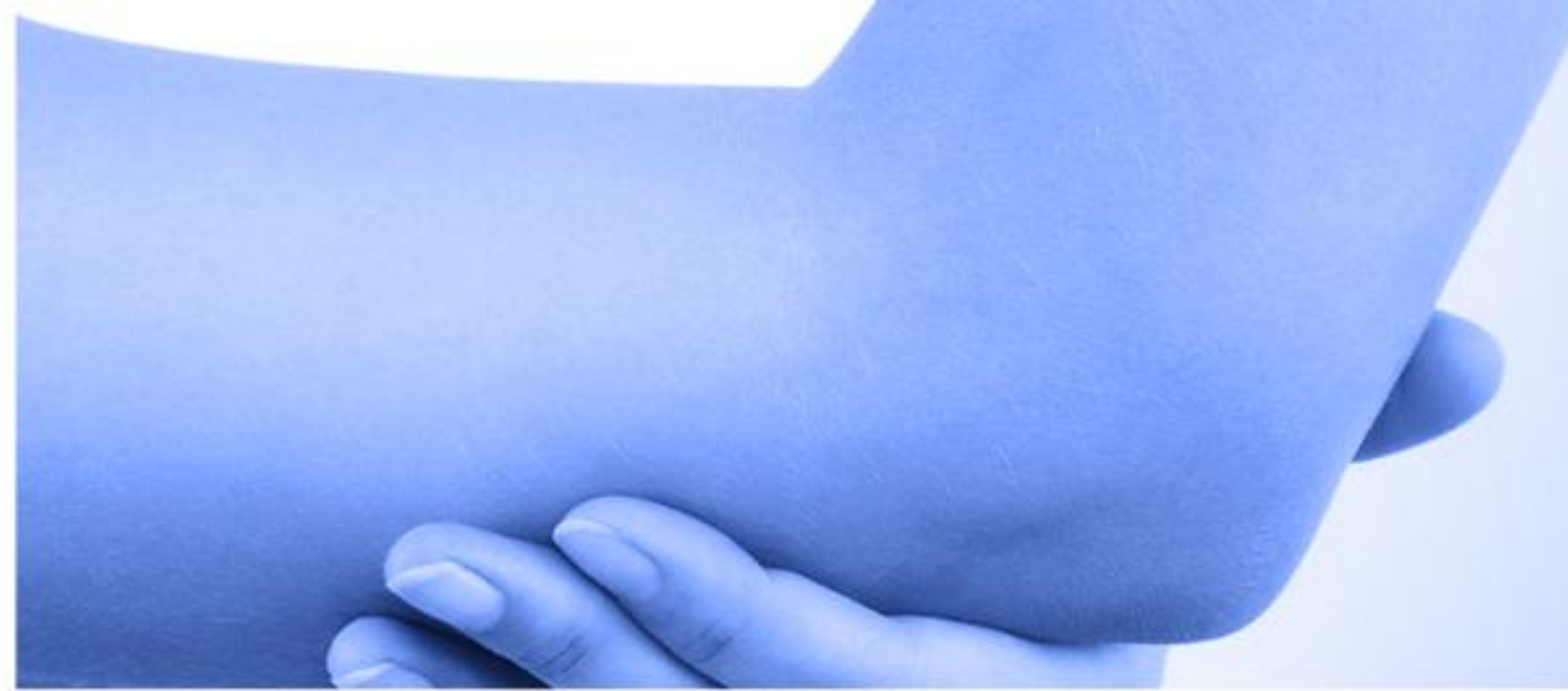

Tennis/Golf Elbow Strap

Targeted Relief
Code: 8102



ویژگی ها:


- تک سایز بوده و برای اکثر افراد مناسب است.
- قابل استفاده برای دست راست و چپ.
- پد دایره ای امکان ایجاد فشار نقطه ای را فراهم میسازد.
- بند چسبی بلند قابل تنظیم دور آرنج، ایجاد فشار مناسب را تضمین میکند.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، نئوپرن، کتان

جدول سایز بندی:

۵ سانتی متر (۲ اینچ) زیر مفصل آرنج، دور ساعد اندازه بگیرید.

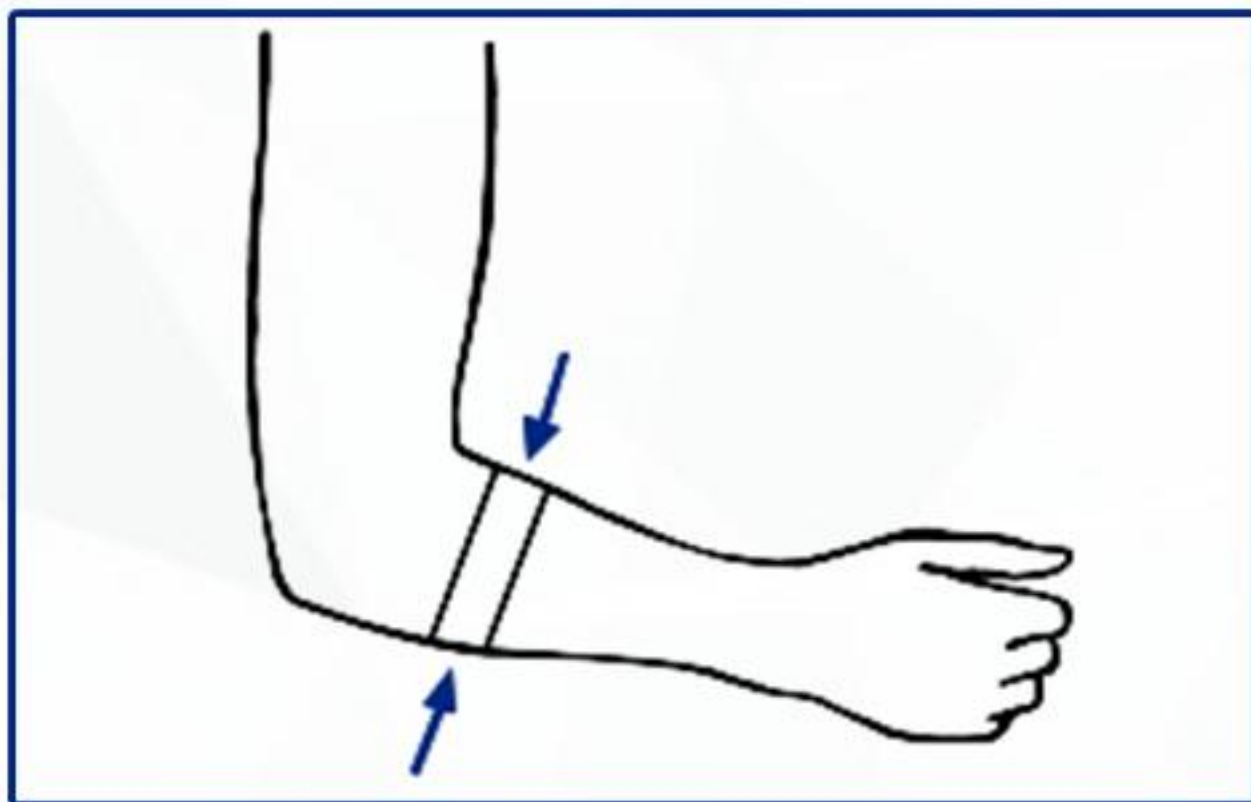

F

21-34.5 cm (8.27-12.99")

نام محصول:

آرنج تنیس بازان نئوپرنی

مشخصات:

مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. کپسول مفصلی و رباط های متعددی جهت حمایت از این مفصل وجود دارد. این مفصل در طول فعالیت های مختلف استفاده می شود و دارای تحرک بالایی می باشد، در نتیجه در معرض آسیب قرار دارد، آرنج تنیس بازان یا التهاب کوندیل خارجی آرنج، وضعیتی است که در آن قسمت بیرونی آرنج دردناک می شود. هر فعالیتی که شامل استفاده مکرر از عضلات اکستانسور ساعد باشد، می تواند باعث ایجاد صدمه و التهاب تاندونی حاد یا مزمن در محل اتصال عضلات به کوندیل خارجی آرنج گردد. این امر منجر به ایجاد درد و حساسیت در قسمت خارجی آرنج می گردد. باند تنیس البو کیورد به گونه ای طراحی شده که با ایجاد فشار به مناطق خاصی از عضلات ساعد، باعث کاهش درد در محل اتصال عضلات تحریک شده، می شود. این آرنج بند اغلب بوسیله بازیکنان تنیس، بازیکنان گلف، کارگران صنعتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. التهاب آرنج گلف بازان نیز به دلیل التهاب تاندون های متصل به کوندیل داخلی آرنج ایجاد می شود. باند تنیس البوی کیورد به کاهش مشکلات آرنج تنیس بازان و گلف بازان کمک می کند.

موارد استفاده:

- اپی کندیلیت خارجی (آرنج تنیس بازان)
- اپی کندیلیت داخلی (آرنج گلف باز)
- التهاب محل اتصال تاندون های عضلات ساعد به کوندیل های داخلی و خارجی.



Wrist Support



Wrist Band

Adjustable
Code: 9102




مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید. با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

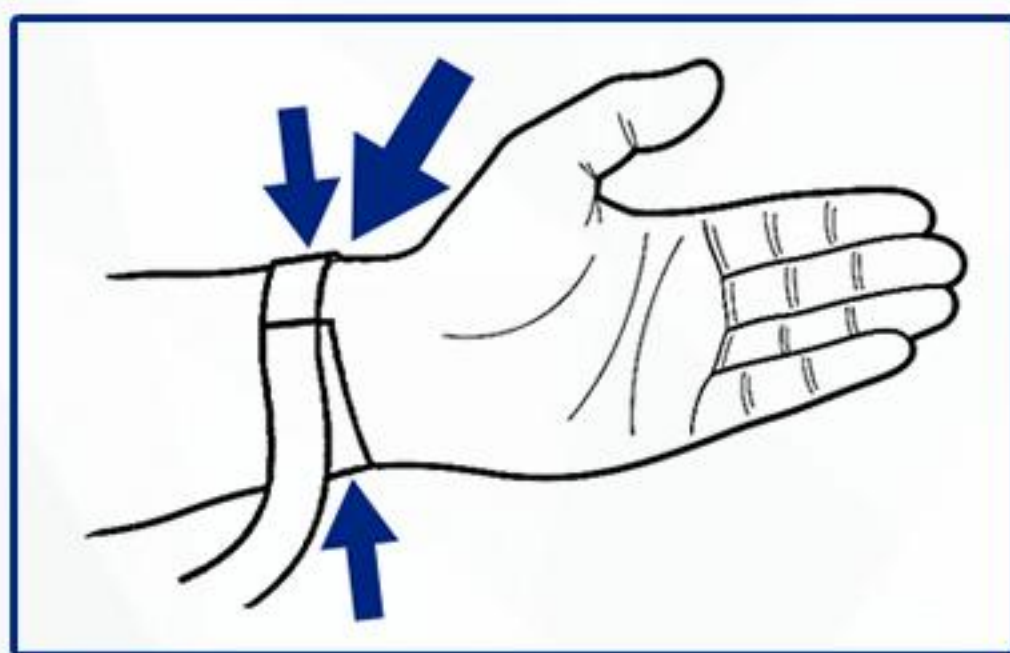

S	12-14cm (4.72-5.51")
M	14-16cm (5.51-6.29")
L	16-18cm (6.29-7.08")
XL	18-20cm (7.08-7.87")
2XL	20-22cm (7.87-8.66")

نام محصول:

مچ بند قابل تنظیم نئوپرنی (با استرپ)

مشخصات:

مفصل مچ دست از ۸ استخوان کوچک دست و استخوان های ساعد تشکیل شده است، که باهم مفصل مچ دست را تشکیل می دهند این مفصل به دلیل تنوع وظایف و فعالیت هایی که انجام می دهد، نیاز به قدرت و تحرک کافی دارد. با این حال، مشکلات متعددی در خصوص این ناحیه وجود دارد. هدف از بستن مچ بند، حمایت از مفاصل مچ دست در طول حرکات تکراری سنگین و کمک کردن به مچ دست ورزشکاران در طول تمرین می باشد. در طی این حرکات، مچ دست می تواند تحت فشار، کشیده شود و منجر به بروز آسیب های احتمالی گردد، مچ بند قابل تنظیم نئوپرنی کیورد با در بر گرفتن مچ دست، گرما را حفظ کرده و درد و تورم را کاهش می دهد.

موارد استفاده:

- مچ ضعیف
- بی ثباتی مچ دست
- رگ به رگ شدن مچ، کشیدگی
- برای ورزشکاران در طول تمرینات سنگین و مسابقات

ویژگی ها:

- با کیفیت و با دوام.
- استرپ (بند چسبی) بلند قابل تنظیم دور مچ، ایجاد فشار مناسب را تضمین میکند.
- استفاده از پارچه نئوپرن با خاصیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات و مفاصل کمک می کند.
- متناسب با مچ دست چپ یا راست است.

Thumb Support



XR Thumb Brace

Lateral
Thumb Stay
Code: 9104




- بند چسبی دور مچ موجب ثبات در حین فعالیت میشود.
- درد را تسکین و مفصل کاپومتاکارپال را تثبیت می کند.
- مچ دست و شست را ساپورت و کف دست را آزاد می گذارد.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید. با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

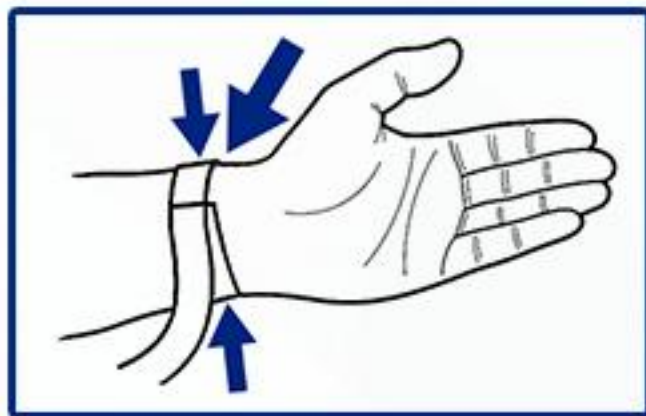

S	12-14cm (4.72-5.51")
M	14-16cm (5.51-6.29")
L	16-18cm (6.29-7.08")
XL	18-20cm (7.08-7.87")
2XL	20-22cm (7.87-8.66")
3XL	22-24cm (8.66-9.45")
4XL	24-26cm (9.45-10.24")

نام محصول:

تثبیت کننده شست نئوپرنی

مشخصات:

تثبیت کننده شست نئوپرنی کیورد دارای یک اتل آلومینیومی قابل فرم دهی بوده که بی حرکتی موضعی انگشت شست را موجب شده و امکان حرکت آزادانه سایر انگشتان را فراهم می سازد. این محصول به قرارگیری صحیح مفاصل کارپال، شست و به بهبود التهاب و درد ناشی از استفاده بیش از حد از این مفاصل کمک می کند. همچنین استرپیهای قابل تنظیم، حمایت و ساپورت بیشتری را نسبت به سایر مدلها در دور مچ دست و شست ایجاد می کنند. استفاده از این محصول حرکات مکرر انگشت شست و کشیدگی آن را که به ویژه در حین تایپ کردن، نوشتن، استفاده از ماوس و سایر فعالیت های شغلی یا ورزشی رخ میدهد، به حداقل می رساند.


موارد استفاده:

- درد شست
- آرتروز و سندرم دکوروان
- رگ به رگ شدن / کشیدگی شست
- بی ثباتی مفصل کارپومتاکارپال

ویژگی ها:

- اتل آلومینیومی قابل فرم دهی و قابل جابجایی، باعث بیحرکتی موضعی انگشت شست در موقعیت مورد نظر میشود و می توان با تجویز پزشک و با پیشرفت بهبودی آن بیرون آورد.
- استفاده از پارچه نئوپرن با خاصیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات و مفاصل کمک می کند.
- برای دست چپ یا راست مناسب است.

Wrist Support

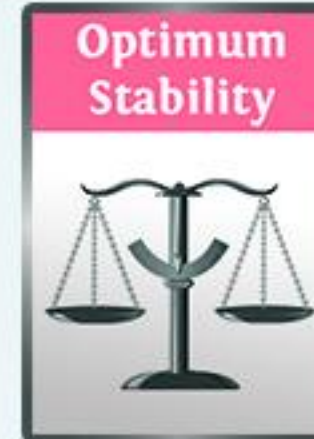

Wrist Brace

Code: 9108
Stabilized Wrist Brace
(w/Palmar Stay)

Code: 9109
Extreme Stabilized
Wrist Brace
(w/Dorsal & Palmar Stays)




- آتل آلومینیومی بکار رفته در این محصول شکل پذیر بوده و می توان آن را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنرا از محصول بیرون آورد.
- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مچ دست جلوگیری می کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید.

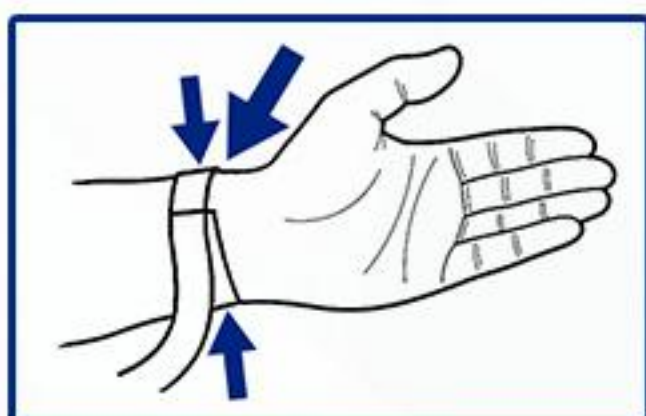

S	12-14cm (4.72-5.51")
M	14-16cm (5.51-6.29")
L	16-18cm (6.29-7.08")
XL	18-20cm (7.08-7.87")
2XL	20-22cm (7.87-8.66")
3XL	22-24cm (8.66-9.45")
4XL	24-26cm (9.45-10.24")

نام محصول:

کد ۹۱۰۸: تثبیت کننده مچ دست نئوپرنی

کد ۹۱۰۹: تثبیت کننده مچ دست اکستریم نئوپرنی

مشخصات:

این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۰۸ دارای یک آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف دست میباشد و کد ۹۱۰۹ دارای دو آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف و پشت دست میباشد که امکان تثبیت و بیحرکتی بیشتر مچ و دست را طی فرآیند گرمادرمانی فراهم میکنند. استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مچ دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند. بنابراین به کاهش التهاب در مچ دست کمک می کند و در مدیریت درمان سندرم تونل کارپال مفید میباشد.

موارد استفاده:

- سندرم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مچ دست
- قابل استفاده بعد از آسیب های مچ دست
- محافظت از مچ دست پس از اتمام دوره گچ گیری

ویژگی ها:

- می توان با جابجا کردن آتلها، این مچ بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.
- در مدل اکستریم یک آتل اضافی در پشت دست قرار گرفته است تا به تثبیت بیشتر مچ دست کمک کند.


Wrist Support



Wrist Brace w/Thumb Spica

Code: 9110
Stabilized Wrist Brace w/Thumb Spica (w/Palmar & Thumb Stays)

Code: 9111
Extreme Stabilized Wrist Brace w/Thumb Spica (w/Dorsal, Palmar & Thumb Stays)

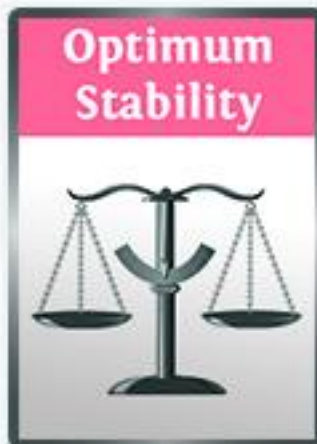


- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مچ دست جلوگیری می کند.
- استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مچ دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید.

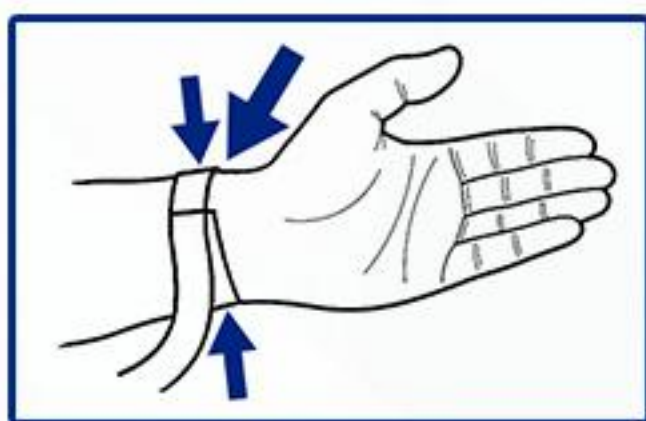

S	12-14cm (4.72-5.51")
M	14-16cm (5.51-6.29")
L	16-18cm (6.29-7.08")
XL	18-20cm (7.08-7.87")
2XL	20-22cm (7.87-8.66")
3XL	22-24cm (8.66-9.45")
4XL	24-26cm (9.45-10.24")

نام محصول:

کد ۹۱۱۰: تثبیت کننده مچ و شست دست نئوپرنی
کد ۹۱۱۱: تثبیت کننده مچ و شست دست اکستریم نئوپرنی

موارد استفاده:

- سندرم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مچ دست
- آسیبهای انگشت شست شکاربان (نارسایی در رباط اولنار)
- سندرم دکوروان
- آسیب های استخوان اسکافوئید
- بی ثباتی مفصل کارپو متاکارپال
- محافظت از مچ دست پس از اتمام دوره گچ گیری.

ویژگی ها:

- این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۱۰ دارای دو اتل آلومینیومی کف و انگشت شست دست میباشد و کد ۹۱۱۱ دارای سه اتل آلومینیومی کف، پشت و انگشت شست دست میباشد که به تثبیت بیشتر مچ دست و شست طی فرآیند گرمادرمانی کمک میکنند. به علاوه این اتلها شکل پذیر بوده و می توان آنها را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنها را از محصول بیرون آورد.
- می توان با جابجا کردن اتلها، این مچ بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.
- با حمایت و ساپورت و محدود کردن حرکات مچ و شست دست و در عین حال امکان عملکرد حداکثری دست، از مچ و شست ضعیف یا آسیب دیده حمایت میکند.



Finger Support



Finger Splint (Short)

Used in Hospitals
Code: 10101

نام محصول:

اسپلینت انگشت (کوتاه)

مشخصات:

مزیت آتل انگشت کیورد کاربرد سریع، طراحی ساده و تثبیت کافی براساس موارد تجویز ذکر شده است. این اسپلینت به بی حرکت کردن نواحی آسیب دیده و جلوگیری از آسیب بیشتر انگشت دوم تا چهارم کمک می کند، همچنین در آسیب فالانژیال متاکارپ و مفصل بین فالانژیال انگشت دوم تا چهارم مفید است.

موارد استفاده:

- آسیب دیدگی انگشتان ۲ الی ۴
- آسیب دیدگی در مفصل متاکارپوفالنجیل و اینترفالنجیل انگشتان ۲ الی ۴
- بعد از درمان انگشتان ۲ الی ۴
- بیحرکتی بعد از عمل جراحی در انگشتان ۲ الی ۴

ویژگی ها:


- اسپلینت آلومینیومی شکل پذیر بوده و می توانند بر اساس نیاز بیمار خم شده و فرم دهی شوند.
- آتل با مواد نرم (پارچه نئوپرن) پوشانده شده است.
- استفاده از بندهای چسبی زبر و نرم پوشیدن و درآوردن محصول را آسان میسازد.

مواد سازنده:

پارچه نئوپرن، نایلون، کش، پلی استر و آلومینیوم

جدول سایز بندی:

دست را صاف رو میز قرار دهید سپس طول انگشت را اندازه گیری کنید. طول انگشت برابر است با فاصله از بند اول انگشت (نزدیکترین بند به دست) تا نوک انگشت.

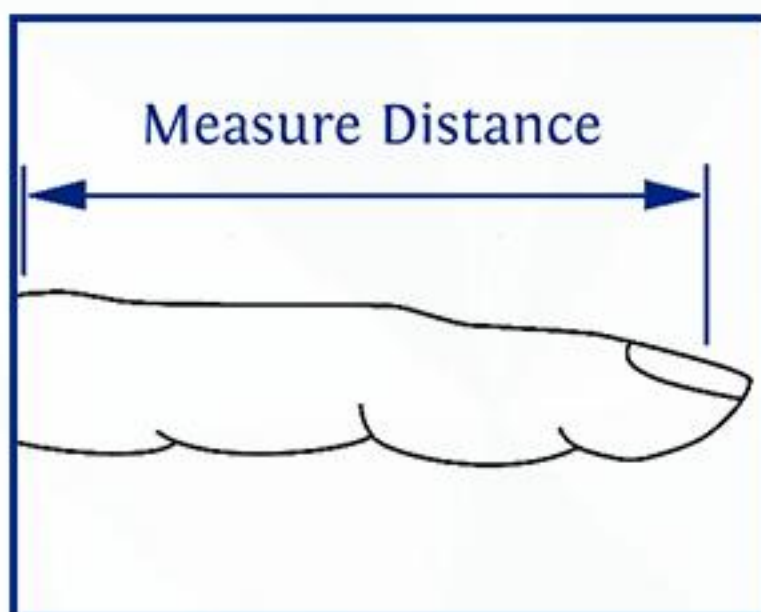


XS	4cm (1.57")
S	5cm (1.96")
M	6cm (2.36")
L	7cm (2.75")
XL	8cm (3.14")



اندام تحتانی

اندام تحتانی در کالبدشناسی عبارت است از مجموعه لگن خاصره، ران، زانو، ساق، مچ، قدم، کف پا و انگشتان پا. استخوان‌های لگن خاصره نیز جزو اندام تحتانی هستند. شرح اسکلتی اندام تحتانی به شرح ذیل می‌باشد. کمر بند لگنی: استخوان‌های هیپ سمت راست و چپ همراه با استخوان خاجی یک حلقه کامل استخوانی موسوم به کمر بند لگنی را تشکیل می‌دهند. کمر بند لگنی اندام تحتانی را به استخوان بندی محوری متصل می‌کند. لگن (Pelvis): مجموعه‌ی لگن از دو استخوان هیپ، یک استخوان خاجی و یک استخوان دنبالچه تشکیل شده است. استخوان ران (Femur): استخوان ران (فمور) درازترین استخوان بدن است. این استخوان از طرف بالا با استخوان هیپ مفصل می‌شود و مفصل ران را تشکیل می‌دهد و از طرف پایین نیز با استخوان درشت نی مفصل شده و مفصل زانو را تشکیل می‌دهد. استخوان کشکک (Patella): استخوان کشکک (کاسه زانو) بزرگترین استخوان سزاموئید یا کنجیدی (یک واژه یونانی برای چیزی شبیه تخم کنجد می‌باشد) بدن انسان است. این استخوان با انتهای تحتانی استخوان ران مفصل می‌شود. درشت نی و نازک نی (Tibia and Fibula): ناحیه ساق پا شامل دو استخوان بلند موسوم به درشت نی و نازک نی می‌باشد. استخوان درشت نی نسبت به نازک نی بزرگتر و درشت تر است و در بخش داخلی این استخوان قرار دارد. استخوان‌های مچ پا (Tarsal bones): ناحیه مچ پا از هفت قطعه استخوان، موسوم به استخوان‌های تارسال ساخته شده است. استخوان‌های مچ پا شامل: استخوان قاپ، استخوان پاشنه، استخوان ناوی استخوان تاسی و استخوان میخی (داخلی، میانی، خارجی) می‌باشند. استخوان‌های کف پا (Metatarsal bones): در هر پا پنج استخوان کف پای (متاتارسال) وجود دارد. استخوان‌های کف پا به ترتیب از سمت شست به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می‌شوند. بندهای انگشتان (Phalanges): انگشتان پا نیز مثل انگشتان دست از چهارده قطعه استخوان تشکیل شده‌اند. اولین انگشت پا نیز همانند انگشت شست دست فقط دو قطعه استخوان دارد. بقیه انگشتان پا هر کدام سه قطعه استخوان دارند که بندهای اول، دوم و سوم انگشتان نامیده می‌شود.

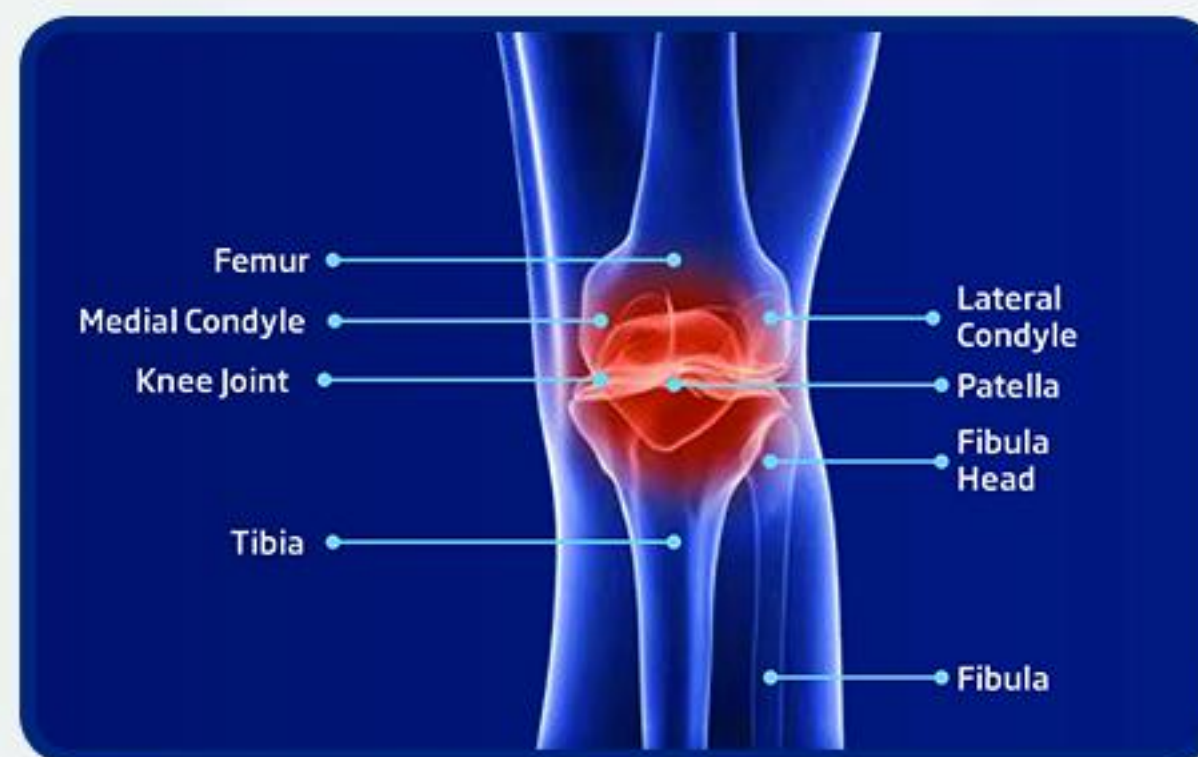

Pelvic Orthosis



T-POD 6X Pro Trauma Pelvic Orthotic Device Pro

Pulley System 6X
Used in EMS &
hospital.
Code: 11301



نام محصول:

تثبيت کننده آنی لگن بعد از ترما (T-POD)

مشخصات:

محصول تثبیت کننده آنی لگن بعد از ترما (T-POD) با بهره گیری از سیستم ایجاد فشار پیشرفته مکانیکی خود که ۱ کیلو ژول انرژی وارد به اهرم این محصول را به ۶ کیلو ژول انرژی در محل نصب این محصول تبدیل می کند و با ایجاد یک فشار یکنواخت و کنترل شده در ناحیه لگن ضمن جلوگیری از خونریزی داخلی در این ناحیه از حرکت بیشتر استخوان ها در محل شکستگی و آسیب بیشتر به رگ ها و شریان ها در منطقه شکستگی جلوگیری نموده و در حالیکه احتمال زنده ماندن بیمار را تا ۵۰ درصد افزایش میدهد، از آسیب بیشتر بیمار جلوگیری می نماید. می تواند تثبیت بهتری برای شکستگی همه جانبه و ناپایدار لگن نسبت به تثبیت کننده های خارجی دیگر فراهم کند. به دلیل وجود یک سری قطعات اضافه بر روی محصول تولیدی تحت برند کیورد شرکت سپید تن پرنیان پویش این امکان وجود دارد پس از کشیدن دستگیره و فیکساتوری لگن، نخ های بلند و اضافه دستگیره به راحتی دور پینه های نصب شده بر روی محصول پیچانده شود و این مهم از جابه جایی بیش از حد بیمار آسیب دیده در زمان نصب محصول جلوگیری کرده و مانع ایجاد مزاحمت برای بیمار و پزشک می شود. انعطاف پذیر بودن این محصول، امکان پوشش مناسب کل لگن بیمار را به خوبی فراهم می سازد.

موارد استفاده:

- به منظور تثبیت لگن و در آسیب های لگن
- در شرایط مشکوک به شکستگی لگن

- جلوگیری از خونریزی داخلی لگن
- شکستگی و دررفتگی لگن

ویژگی ها:


- قابلیت استفاده در طب اورژانس و طب نظامی.
- سیستم مکانیکی قرقره ای ایجاد فشار ۶ برابری یکنواخت و کنترل شده را تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره میسر میسازد.
- طراحی سبک و قابل حمل با قابلیت نصب یک نفره
- ۱۰۰ درصد سازگار با دستگاه های عکس برداری پزشکی اشعه ایکس و ام آر آی.
- دارای برچسب درج تاریخچه نصب محصول به منظور بازرسی ۱۲ ساعته محل آسیب و راهنمای تنظیم فشار سیستم قرقره تک سایز بوده و برای اکثر افراد مناسب است.

مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PVC، PP، PE

سایز بندی:

محصول تک سایز بوده و متناسب با اکثر افراد با دور لگن ۵۶.۲۹-۱۸.۵ اینچ (۱۴۳-۵۰ سانتی متر) میباشد.

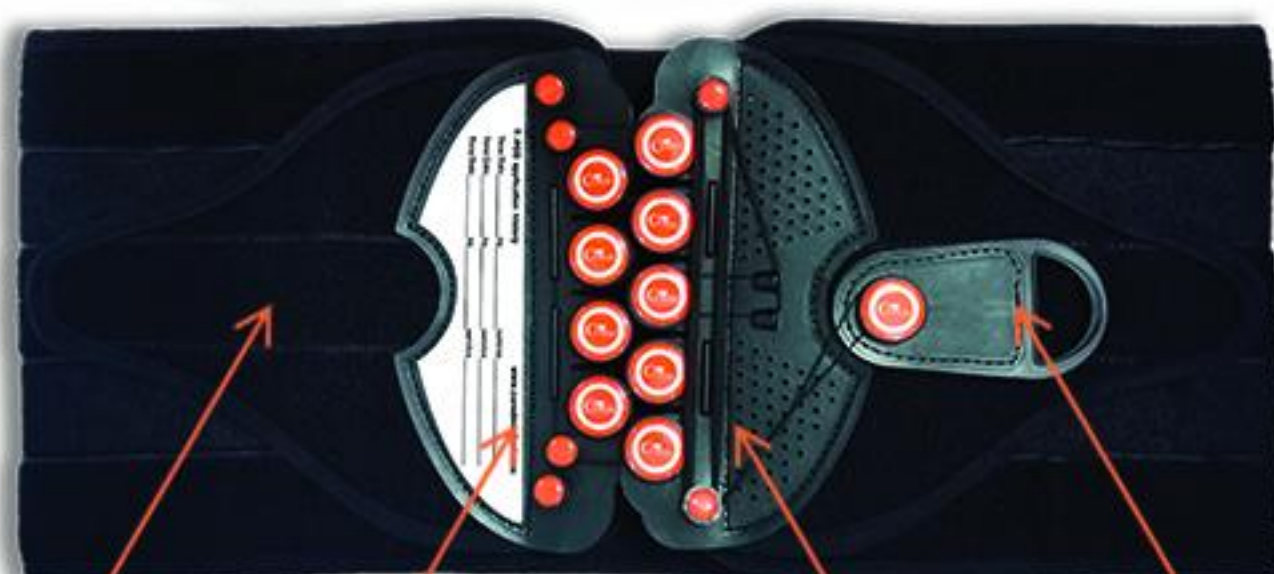

- دستگیره
- سیستم مکانیکی پیشرفته ۱ به ۶ قرقره ای
- برچسب درج تاریخچه نصب محصول
- راهنمای تنظیم فشار

Knee Support



Patella Tendon Strap

Adjustable Fit
Code: 13101




مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، کتان، پلی استر، فلز

جدول سایز بندی:

باند کشکک کیورد تک سایز بوده و برای دور زانو از ۱۲ تا ۲۵ اینچ (۳۰ تا ۶۳ سانتی متر) مناسب میباشد لذا دور کشکک زانو خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

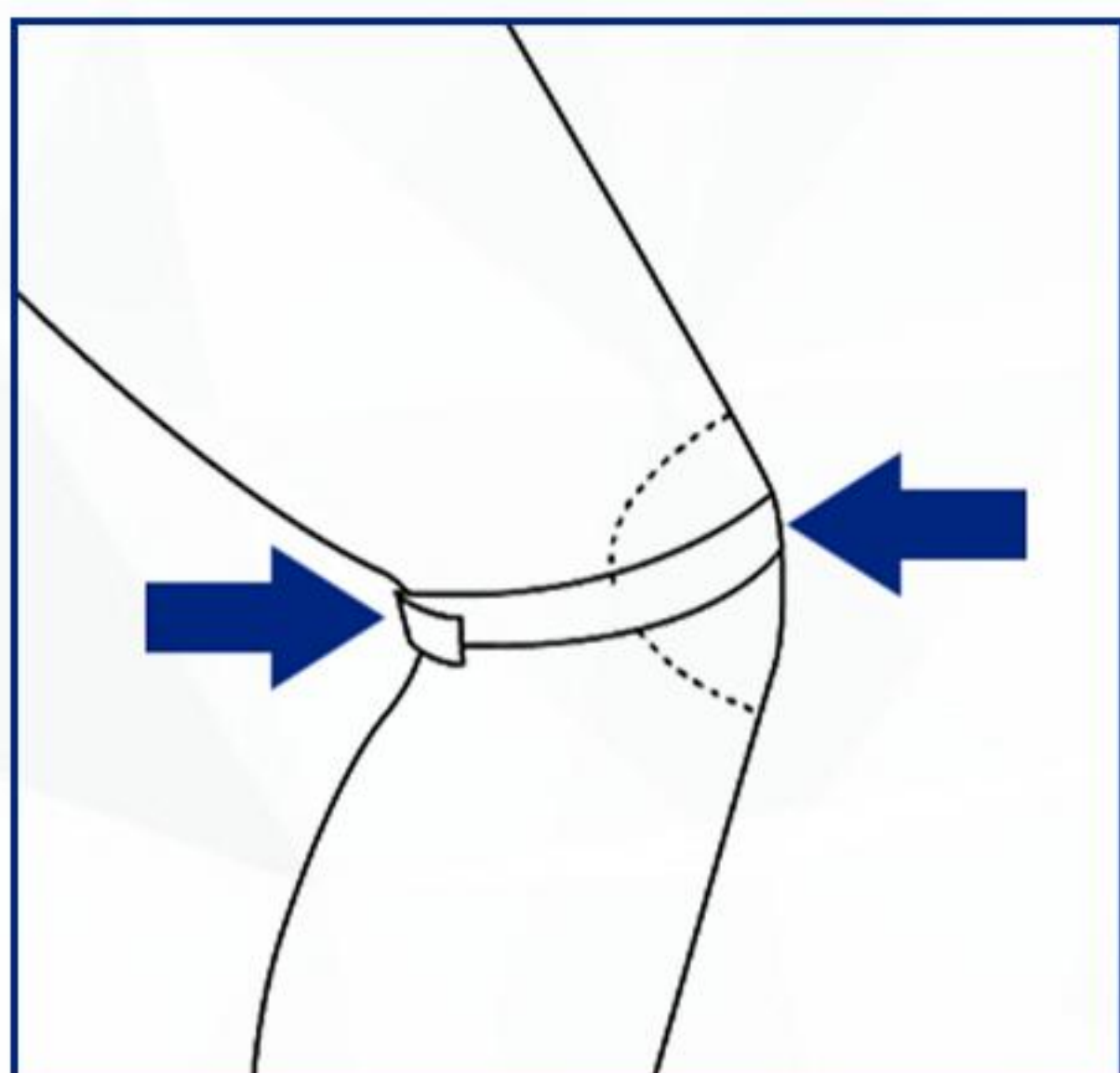

نام محصول:

باند کشکک قابل تنظیم نئوپرنی

مشخصات:

باند کشکک قابل تنظیم نئوپرنی کیورد دارای یک پد نئوپرنی بوده و به گونه ای طراحی شده است که مستقیماً در زیر کشکک، روی تاندون کشکک پوشیده شود. این باند می تواند برای کمک به تسکین درد مرتبط با هرگونه تحریک و التهاب تاندون کشکک ناشی از فعالیت های شغلی یا ورزشی استفاده شود. ضمناً این محصول حرکات ناخواسته یا بیش از حد کشکک را کاهش دهد. و استرپ قابل تنظیم این محصول یک حمایت متناسب و راحت را فراهم می کند.

موارد استفاده:

- تاندونیت کشکک
- سندرم اسگود-شلاتر
- ناپایداری خفیف کشکک

ویژگی ها:

- پیچیدن این باند دور کشکک پوشیدن و درآوردن این باند را راحت و آسان میسازد.
- این محصول با نئوپرن با کیفیت تولید شده است.
- مناسب برای زانوی چپ و راست.
- پد اضافی روی کشکک فشار و حمایت مازاد را در ناحیه مورد نظر فراهم می کند.
- کمک به تسکین درد زانو، حمایت و تثبیت کاسه زانو.
- محصول تک سایز است (یک سایز برای اکثر افراد مناسب است).

Knee Support



ADJ Knee Support

Adjustable Fit

Code: 13104



- پد دور کشکک زانو، از کشکک محافظت کرده و آنرا تثبیت می کند.
- ساخته شده از نئوپرن نرم.
- به سادگی قابل پوشیدن و در آوردن است.
- قابل استفاده برای زانوی راست و چپ است.


مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، کتان، پلی استر

جدول سایز بندی:

در حالت ایستاده، قسمت دور کشکک زانو خود را اندازه بگیرید.

M	34.4-41.4cm (13.5-16.3")
L	41-48cm (16.1-18.9")
XL	47-54cm (18.5-21.2")
2XL	52-59cm (20-23.2")
3XL	58-65cm (22.8-25.5")

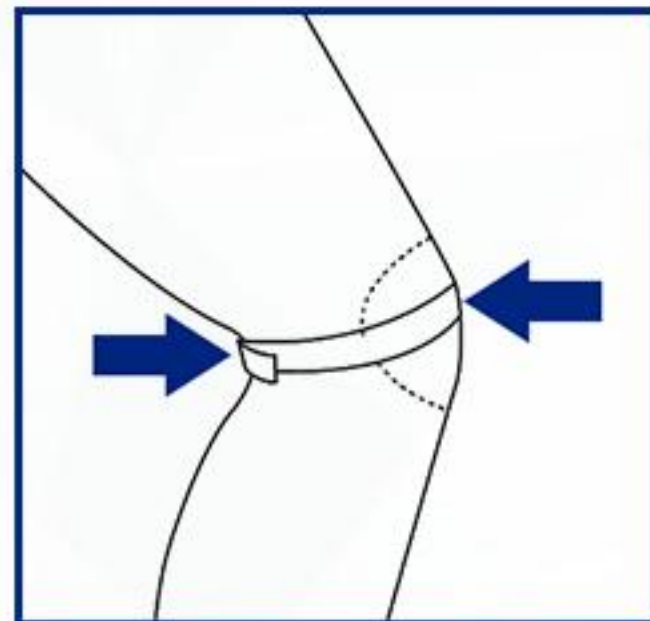

نام محصول:

زانو بند کشکک باز قابل تنظیم نئوپرنی

مشخصات:

زانو بند کشکک باز قابل تنظیم کیورد دارای یک طراحی ویژه بوده که منجر به پوشیدن راحت آن میگردد. این زانو بند با بستن دور زانو به راحتی پوشیده میشود و میتواند تناسب سائیزی مورد نیاز بیماران را فراهم کند. این زانوبند با مواد سبک وزن ساخته شده و به فرد امکان فعالیت طی استفاده در کل روز را می دهد. این زانوبند که با ترکیبی متشکل از پارچه نئوپرن ساخته شده، گرمای بدن را با هدف گرما درمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل کمک کند. این محصول با طراحی سوراخ باز در قسمت کشکک به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک کرده و با لبه های کاملاً نرم و با استفاده از مواد اولیه با دوام و راحت میتواند به بهبودی از آسیب های ناحیه زانو کمک کند. این زانوبند برای هر دو زانوی چپ و راست مناسب است.

موارد استفاده:

- آرتروز
- زانوی ضعیف
- بی ثباتی جزئی مفصل زانو
- بی ثباتی جزئی کشکک
- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف

ویژگی ها:

- باز بودن کشکک در ناحیه ی زانو، فشار روی کاسه زانو را کاهش میدهد.

Knee Support



Knee Stabilizer

Medial & Lateral Spiral Stays
Code: 13106



ویژگی ها:


- کشکک باز بوده تا فشار روی کاسه زانو کاهش یابد و پد حائل نئوپرنی کاسه زانو، از کشکک محافظت و آنرا تثبیت میکند.
- این محصول قابل استفاده بر روی زانوی راست و چپ.
- بندهای چسبی، حمایت کنترل شده را ایجاد میکنند.
- چهار آتل فلزی مستحکم مارپیچی در طرفین زانو، محافظت و مراقبت لازم را فراهم می آورند.
- پارچه نئوپرن بکار رفته در آن حرارت بدن را حفظ میکند تا مفصل زانو گرم شده و گردش خون افزایش یابد.

مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، فلز

جدول سایز بندی:

در حالت ایستاده، قسمت دور کشک زانو خود را اندازه بگیرید.

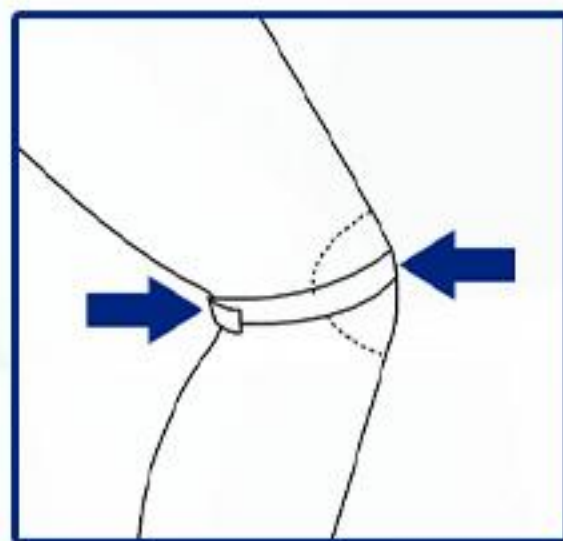

S

29-32 cm (11.41-12.59")

2XL

41-44 cm (16.14-17.32")

M

32-35 cm (12.59-13.77")

3XL

44-47 cm (17.32-18.50")

L

35-38 cm (13.77-14.96")

4XL

47-50 cm (18.50-19.68")

XL

38-41 cm (14.96-16.14")

5XL

47-50 cm (18.50-19.68")

نام محصول:

تثبیت کننده زانو چهار فنره نئوپرنی

مشخصات:

تثبیت کننده زانو چهار فنره کیورد با وجود آتلهای مستحکم جانبی، برای درمان و تسکین کندرومالاسی، کشیدگی تاندون کشکک و زانوهای مبتلا به آرتروز، ایده آل میباشد. با چهار آتل مارپیچی حمایت کننده در دو طرف زانو و یک پد حائل روی کاسه زانو، از کشکک و مفصل زانو طی فعالیت ورزشی یا بهبودی از آسیب مراقبت می کند. با پارچه نرم نئوپرن ساخته شده است، گرمای بدن را طی فرآیند گرمادرمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل زانو کمک کند. با طراحی کشکک باز، این زانوبند به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک می کند. لبه های کاملاً پیرایش شده محصول منجر به راحتی و دوام محصول میشوند. استرپ های قابل تنظیم این محصول فشرده سازی و حمایت کنترل شده ی زانو را فراهم میسازند. این زانوبند به گونه ای طراحی شده است که برای استفاده طی کل روز و متناسب با نیاز بیمار بوده و در عین حال دامنه کامل حرکتی را میسر میسازد. این محصول برای زانوی چپ و راست مناسب و قابل استفاده است.

موارد استفاده:

- آرتروز
- کندرومالاسی
- بی ثباتی زانو و کشکک
- کشیدگی / ارگ به رگ شدن زانو
- بعد از عمل

Knee Support



Used in Hospitals



Adjustable Fit



Knee Immobilizer

Used in Hospitals
Code: 13301



مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، فلز، ابر

جدول سایز بندی:


این محصول تک سایز است و برای آناتومی اکثر زانو ها متناسب است و میتواند مناسب برای دور زانو از ۳۰ سانتی متر تا ۶۳ سانتی متر باشد.

جهت استفاده از این محصول در حالت ایستاده، قسمت دور کشکک زانو خود را اندازه بگیرید.

ضمناً این محصول در دو ارتفاع موجود میباشد:

ارتفاع کوتاه ۳۸ سانتی متر = سایز متوسط (برای کودکان)

ارتفاع بلند ۵۰ سانتی متر = سایز بزرگ (برای بزرگسالان)

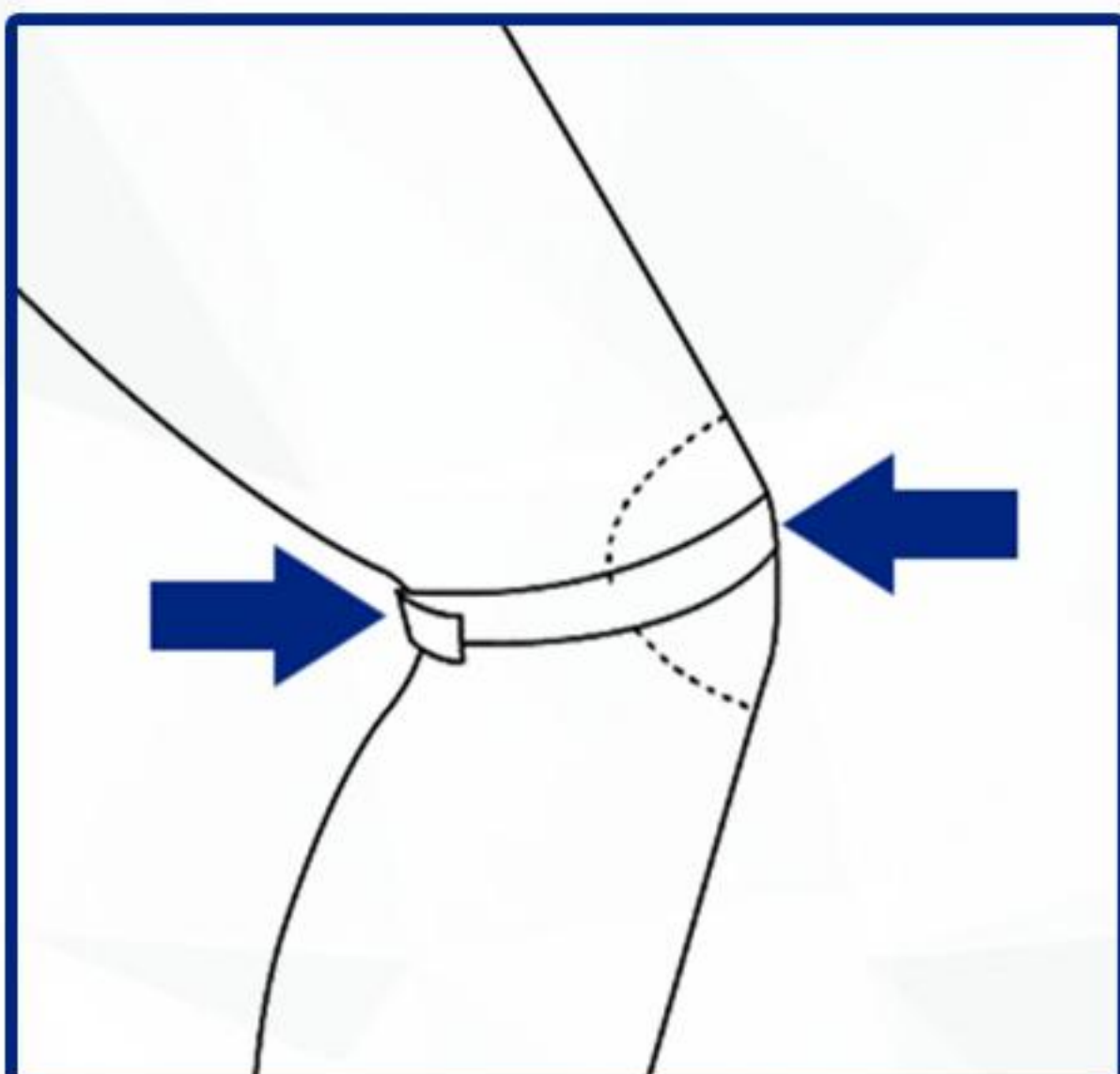

نام محصول:

بیحرکت کننده زانو با پد کشکک

مشخصات:

بیحرکت کننده زانو با پد کشکک کیورد با طراحی چهار تکه دارای قابلیت تنظیم و سازگاری با فرم زانوی افراد مختلف میباشد علاوه بر آن:

- استفاده از پارچه حوله ای در قسمت داخل محصول باعث راحتی مصرف محصول میشود.
- با بهره مندی از پنچ آتل سخت فلزی مفصل زانو را کاملاً بیحرکت نگه میدارد.
- آتل های محصول را می توان جهت راحتی در شستشوی محصول جدا کرد و پس از شستشو به محصول متصل نمود.

موارد استفاده:

- قبل و بعد از عمل جراحی، بعد از سانحه، عضله و یا صدمات رباط و پس از حذف گچ.
- درمانهای نیاز به مراقبت ویژه پس از دوره درمان موفق کانسروتیو صدمات رباطهای کولترال.
- شکستگی هایی که قطعات استخوان از هم جدا نشده باشند و ترک خوردگی ها در محل مفصل زانو.

ویژگی ها:

- بیحرکت کردن مفصل زانو.
- چهار تکه دارای قابلیت تنظیم و سازگاری با فرم زانوی افراد مختلف.
- تک سایز بوده و برای اکثر سایزهای زانو مناسب است.
- همراه با پد کشکک به منظور ایجاد بیحرکتی کامل.
- دارای اسپلینت های میانی و جانبی جدا شونده و قابل تنظیم.
- دارای سایز قابل استفاده برای کودکان.

Shin Support



Hydrotherapy Shin Support (Water_Resistance Sock)

Hydrotherapy
Code: 12101



- خصوصیت شناوری آب به تعادل بیشتر افراد کمک می کند.
- تکرار تمرین های حرکتی در آب با این محصول باعث افزایش قدرت و استقامت و بهبود انعطاف فرد می شود ضمناً ورزش در آب راحت تر از خشکی بوده و در درمان بعضی بیماری ها مؤثر می باشد.
- انجام تمرینات با این محصول در آب باعث افزایش زمان عکس العمل برای افراد دچار نقصان در تعادل می شود. "به علت خاصیت ویسکوزیته ی آب، حرکت در آب آهسته تر صورت می گیرد."


مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستان، پلی استر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

برای انتخاب سایز مناسب: دور قسمت اوج ساق پا را در حالی که در موقعیت ایستاده هستید اندازه گیری کنید و سایز مناسب را از جدول زیر انتخاب نمایید.

S	31-34 cm (12.2-13.39")
M	34-37 cm (13.39-14.57")
L	36.5-40 cm (14.37-15.75")
XL	39.5-43 cm (15.55-16.93")
XXL	42-46 cm (16.54-18.11")

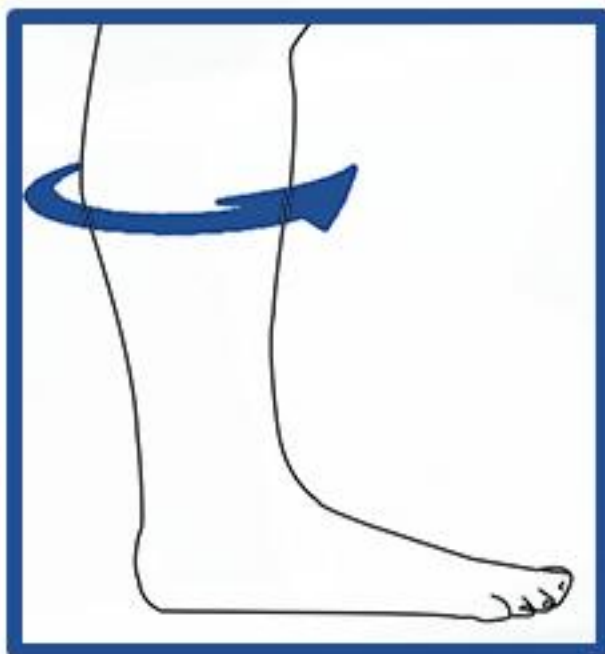

نام محصول:

ساق بند هیدروتراپی (جوراب مقاومتی آبی)

موارد استفاده:

- تقویت عضلات پا (چهار سر ران سرینی و همسترینگ) و مچ پا.
- تسریع فرآیند ریکاوری ورزشکاران پس از آسیب های ورزشی در ناحیه پا
- افزایش اثر بخشی تمرینات ورزشی در آب و ایجاد استقامت در عضلات پا
- روشی ایمن جهت کاهش وزن افراد مبتلا به چاقی از طریق سوزاندن کالری بیشتر، در حالیکه احتمال آسیب دیدگی حین انجام تمرینات ورزشی را کاهش می دهد.
- کمک به افزایش سرعت بهبود در سالمندان افراد مبتلا به درد زانو و دردهای رماتیسمی
- کمک به بهبود اختلالات تعادلی
- کاهش قابل توجه طول درمان مبتلایان به دردهای ناحیه پا

ویژگی ها:

- سبک و به راحتی قابل استفاده می باشد.
- ایجاد یک فشار یکنواخت و قابل کنترل بر روی عضلات پا و عدم ایجاد فشار نقطه ای و غیر قابل کنترل حین استفاده.
- ماساژ درمانی ساق پا به دلیل عبور جریان آب از بین بالهای محصول و عضلات ساق پا.
- کاهش قابل توجه احتمال آسیب دیدگی در مقایسه با محصولات مشابه تقویت کننده عضلات پا مانند وزنه ساق
- در هنگام استفاده از این محصول و از طریق آب درمانی فرد راحت تر می تواند در یک محیط با نیروی جاذبه کم حرکت کند و اقدام به توان بخشی عضلات خود نماید. (افزایش دامنه حرکتی .

Ankle Support



Ankle Support w/Strap

Extra
Compression
Code: 14103



ویژگی ها:

- سبک و قابل استفاده در کفش.
- طراحی قسمت باز در ناحیه انگشتان و پاشنه پا، اجازه طیف گسترده ای از حرکات را می دهد. ضمناً باز بودن قسمت پاشنه فشار کمتری بر ناحیه حساس تاندون آشیل وارد می کند و پوشیدن را راحت تر می کند.
- در صورت عدم نیاز به حمایت و ساپورت اضافی، کش لیگامانی قابل جدا شدن میباشد.
- فنرهای مارپیچی انعطاف پذیر در دو طرف مچ پا، مانند تاندون برای تقویت مچ پا عمل می کنند.
- ساخته شده با نئوپرن، که باعث حفظ گرما و کاهش درد مفصل مچ پا می شود.
- درد ناشی از کشیدگی یا گرفتگی را تسکین می دهد.
- مناسب جهت استفاده پای راست و چپ

مواد سازنده:

پارچه نئوپرن، نایلون، کش، پلی استر و فلز

جدول سایز بندی:

قسمت دور مچ پا را اندازه بگیرید.

XS	16-18 cm (6.29-7.08")
S	18-20 cm (7.08-7.87")
M	20-22 cm (7.87-8.66")
L	22-24 cm (8.66-9.45")
XL	24-26 cm (9.45-10.24")
2XL	26-28 cm (10.24-11.02")



نام محصول:

قوزک بند نئوپرنی (جلو باز آتل دار با کش لیگامانی)

مشخصات:

قوزک بند نئوپرنی کیورد با کش لیگامانی به شکل 8 انگلیسی، طراحی شده است تا کمک کند به بوجود آوردن ساپورت دینامیک دور کل مچ پا و شکل 8 انگلیسی کش لیگامانی آن به بوجود آوردن ساپورت اضافی و فشار متراکم در ناحیه مچ پا طی ورزش و یا فعالیتهای شغلی کمک می کند. همچنین این ساپورت تا حد زیادی خم کردن کف پا و علاوه بر آن پیچ خوردن مچ پا به داخل و خارج را که مربوط به آسیب های لیگامانی و بی ثباتی مچ پا بوده محدود میکند. این محصول با استفاده از بهترین نوع نئوپرن وارداتی با پارچه ضد حساسیت تولید شده و علاوه بر محدود کردن حرکات و حمایت از مفصل مچ پا، با افزایش درجه حرارت موضعی و افزایش متابولیسم و گردش خون روند بهبود را سرعت بخشیده و تورم، درد و خشکی نسوج را از بین می برد. این محصول برای مچ پای چپ و راست و مردان و زنان مناسب است. همچنین مناسب برای درمان سرد و گرم مفاصل میباشد. این محصول برای سایز کودکان نیز عرضه میگردد.

موارد استفاده:

- صدمات ورزشی
- بیماری های مفاصل مچ پا
- پیچ خوردگی مکرر مچ پا
- صدمات استخوانی پس از اتمام دوره گچ گیری
- کمک به درمان کشیدگی و پیچ خوردگی و بی ثباتی مچ پا
- ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا

Foot



Open Toe Cast Sandal

Code: 15110



موارد استفاده:

- برای شکستگی های گچ گرفته شده پا.
- جلوگیری از سر خوردن، ترک خوردن و یا خراب شدن گچ پا.

ویژگی ها:

- دارای پنجه و پاشنه باز به منظور تسهیل عبور هوا.
- ساخته شده از زیره آجدار جهت جلوگیری از سر خوردن در زمان استفاده.
- دارای شش ماه گارانتی

مواد سازنده:

فوم، پلی استر، نایلون، پلی پروپیلن

جدول سایز بندی:

براساس سایز کفش خود از جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید.

XS

29-32 (EU)

S

32-35 (EU)

M

35-38 (EU)

L


38-41 (EU)

XL

41-44 (EU)

2XL

44-47 (EU)

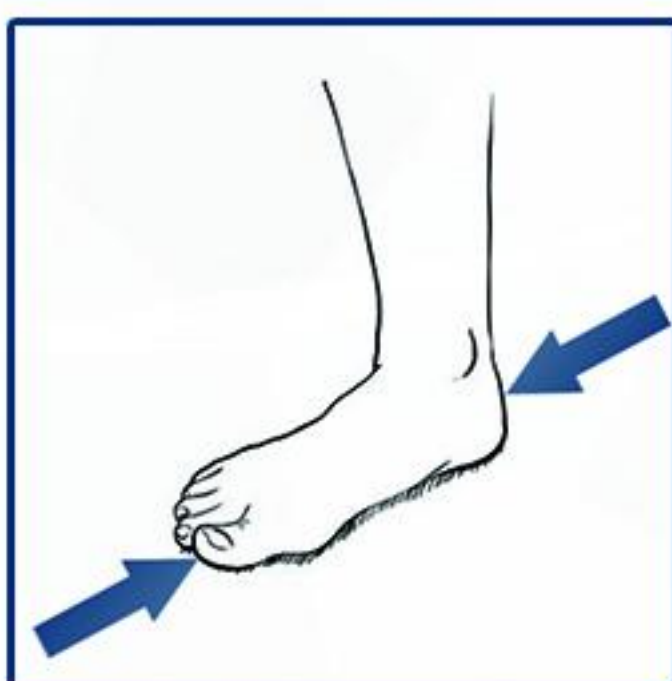

نام محصول: کفش زیر گچ

در برخی موارد هنگام شکستگی پا از گچ برای ثابت نگه داشتن استخوان پا و جوش خوردن مناسب استخوان استفاده می کنند. در هنگام گچ گرفتگی پا، کفش فرد اندازه پای او نیست و باید از کفش زیر گچ استفاده کرد. کفش زیر گچ پا برای محافظت از سایش و پارگی گچ و همچنین جلوگیری از کثیف شدن گچ پا استفاده می شود. محافظ گچ می تواند برای افرادی که پای خود را بر اثر شکستگی گچ گرفته اند، بسیار مفید باشد. بدین ترتیب به راحتی می توان مطمئن بوده که گچ خراب نمی شود زیرا اگر گچ مشکل پیدا کند، شکستگی به خوبی ترمیم نخواهد شد. با توجه به اندازه های متنوعی که کفش زیر گچ کیورد دارد، می توان این محصول را برای هر سنی تهیه نمود.



Sternum Support



Sternum Support

Used in
Hospitals
Code: 2201



• طراحی یک دستگیره منحصر به فرد امکان محکم شدن حداکثری این محصول را در هنگام تنفس عمیق فراهم میکند.


• پوشیدن راحت، پارچه سبک با قابلیت عبور هوا، قابلیت شستشو.

مواد سازنده:


نایلون، کتان، پلی استر، ابر، پلی اتیلن

جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.

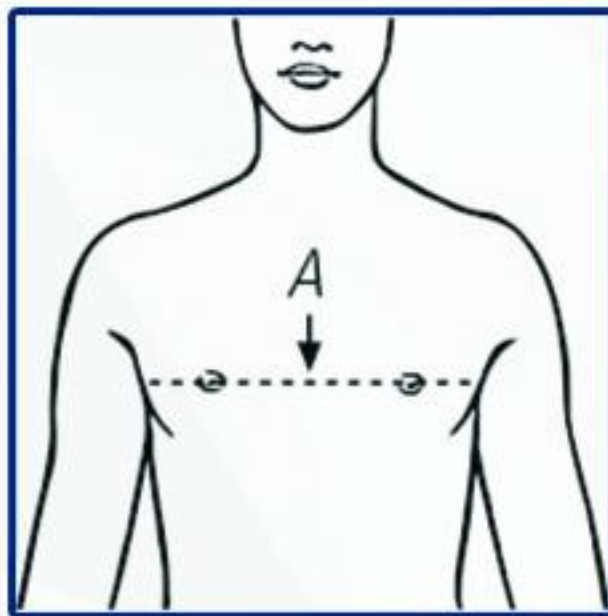

الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.

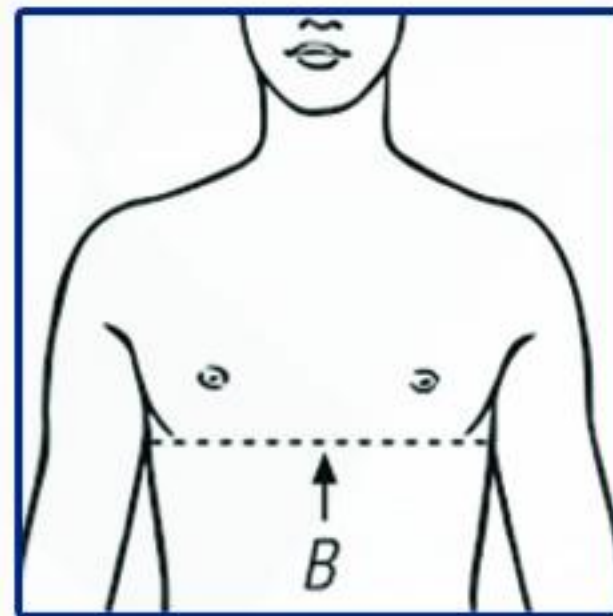

ب = بانوان: دور سینه را از زیر سینه اندازه گیری نمایید.

XS 61-71 cm (24-28")

XL 102-117 cm (40-46")

S 71-81 cm (28-32")

2XL 117-132 cm (46-52")

M 81-91 cm (32-36")

3XL 132-147 cm (52-58")

L 91-102 cm (36-40")

نام محصول:

تثبیت کننده قفسه سینه

مشخصات:

تثبیت قفسه سینه کیورد دور قسمت بالایی قفسه سینه بسته میشود و محافظت و بی حرکتی را برای ناحیه بالای قفسه سینه فراهم می کند. این محصول به جهت نگهداری و به حداقل رساندن حرکت بدنبال جراحی قلب باز، شکستگی های دنده و جناغ ایده آل است. این محصول از کوفتگی های بافت نرم بالای قفسه سینه و التهاب مفصل استرنوکوستال مراقبت می کند. طراحی یک دستگیره منحصر به فرد امکان محکم شدن حداکثری این محصول را در هنگام تنفس عمیق فراهم میسازد.


موارد استفاده:

- آسیب های دنده
- کاهش درد قفسه سینه
- کشیدگی عضلات بین دنده ای
- پس از جراحی قلب باز

ویژگی ها:

- مراقبت مورد نیاز را در آسیب های قفسه سینه و دنده فراهم میکند و دارای طراحی آناتومیک میباشد.
- به طور خاص، برای جراحی قلب باز پس از استرنوتومی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای دو بند شانه برای جلوگیری از لیز خوردن محصول میباشد.
- ایده آل برای حمایت و به حداقل رساندن حرکت، در شکستگیهای دنده و جناغ میباشد.
- از کوفتگی های بافت نرم بالای قفسه سینه، التهاب مفصل استرنوکوستال مراقبت می کند و به خوبی زیر لباس پنهان میشود.

Bandage

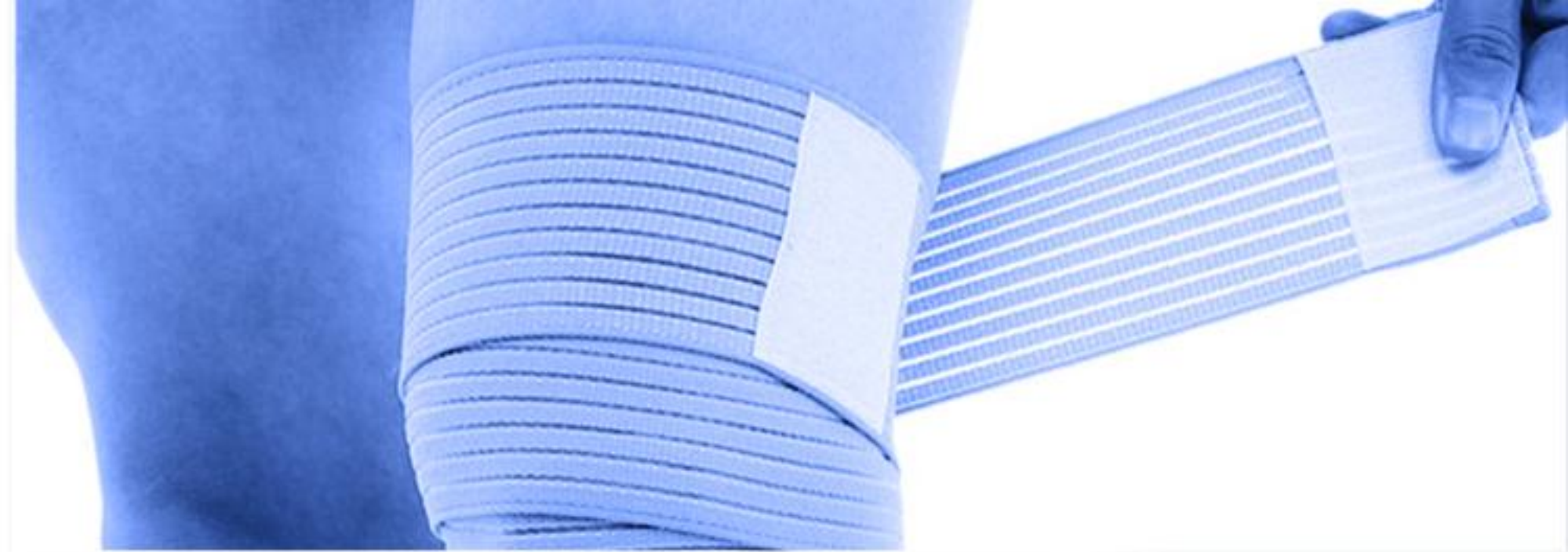

Elastic Bandage

Medium Compression

Code: 17201 (5cm)
Code: 17202 (7.5cm)
Code: 17203 (10cm)
Code: 17204 (15cm)
Code: 17205 (20cm)



ویژگی ها:

- کاهش دهنده درد و تورم
- جلوگیری از پیشرفت التهاب
- ایجاد فشار یکنواخت بر سطح زیر باند
- پوششی در برابر آلودگی ها
- قابلیت ارتجاعی بالا
- به همراه دو گیره عرضه میگردد.

مواد سازنده:

الاستیک، پلی استر

سایز بندی :

این بانداژ کشی در عرض های ۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری ارائه میشوند و هر بانداژ کشی دارای خاصیت کشسانی تا طول ۴ یارد معادل ۳.۶۵ متر میباشد.

نام محصول:

بانداژ کشی فشار متوسط (۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری)

مشخصات:

باند کشی فشار متوسط، فشاری متعادل یعنی نه کم و نه زیاد را روی پانسمان شکل داده و در زمان های مختلف در خواب یا بیداری مورد استفاده قرار میگیرد. باند کشی، نوعی بانداژ با خاصیت کشسانی از جنس پارچه بوده که توسط دو گیره محل آسیب دیده را از صدمات بیشتر محافظت کرده و به عنوان پوششی در برابر آلودگی ها عمل میکند که عموماً قابل شست و شو و چند بار مصرف بوده و استفاده از آن مقرون به صرفه است. بیشترین کاربرد باندهای کشی برای کاهش کنترل کشیدگی، کوفتگی و درد عضلانی بوده و همچنین برای پیشگیری از آسیب های احتمالی جزئی نیز موثر می باشد. توجه داشته باشید که باندهای کشی استریل نیستند و نمیتوان برای کاهش ترشحات یا التهاب زخم های باز به تنهایی از آن استفاده کرد و حتماً قبل از استفاده باید زخم را با گاز استریل پانسمان کنید.

موارد استفاده:

- آسیب های جراحی عمومی، ارتوپدی و ورزشی.
- به عنوان پانسمان فشاری بسیار مناسب میباشد.
- می تواند به جهت حمایت در آسیب های جزئی همچون رگ به رگ شدن، دررفتگی، درد مفاصل، رگ ها، گرفتگی ها، آسیب های تاندون ها و عضلات مورد استفاده قرار گیرد.
- به عنوان یک باند فشاری متوسط برای حمایت عضلانی بسیار مفید است.

N95/99 Respirator



N95 FILTRATION
EFFICIENCY >95%



N99 FILTRATION
EFFICIENCY >99%



EXHALATION
VALVE



N95/99 Particulate Respirator W/Valve

N95 Code:

5Layers: 18104

6Layers: 18106

N99 Code:

6Layers: 18202



نام محصول:

ماسک N95, N99 سوپاپ دار

مشخصات:

ماسک سری N کیورد به شکل حفاظ فیزیکی مقابل دهان و بینی قرار گرفته و وظیفه آنها محافظت از شما در مقابل تنفس آلاینده ها است. در واقع می توان گفت که این ماسکها یکی از انواع روش های محافظتی است که از شما در برابر ذرات گرد و غبار، فیوم ها، گازها، سموم شیمیایی و سایر آلاینده ها محافظت می کند. با استفاده از این ماسکها به مقدار زیادی از ابتلا به بیماری های شغلی و تنفسی پیشگیری میشود. برای مثال از استفاده های عمومی این ماسکها می توان به کاربرد آنها در آلودگی هوا اشاره کرد. با استفاده از این وسیله در هنگام آلودگی هوا می توانیم از ابتلا به بسیاری از بیماری های قلبی و ریوی پیشگیری کنیم. از ماسک تنفسی در مصارف صنعتی نیز استفاده می شود. برای مثال برای کاهش میزان مسمومیت با گرد و غبار چوب، سیمان، مواد شیمیایی و... از ماسک های سری N استفاده میشود. از این نوع ماسک ها در محیط های پزشکی و درمانی نیز استفاده می شود. برای مثال پزشکان و کادر درمانی از ماسک N95 برای پیشگیری از سرایت بیماری های واگیردار استفاده کردند.

موارد استفاده:

- جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار.
- کارایی فیلتراسیون < 95% در مدل N95 و کارایی فیلتراسیون < 99% در مدل N99
- می تواند 95% از ذرات بسیار کوچک (0.3 میکرون) را در

مدل N95 فیلتر کند.

- می تواند 99% از ذرات بسیار کوچک (0.3 میکرون) را در مدل N99 فیلتر کند.

- به منظور فیلتراسیون انواع گرد و غبار و آلودگی هوا و باکتری و ویروس و انواع ذرات اروسول بزرگتر از 0.3 میکرون

ویژگی ها:

- طراحی با لایه های استاندارد تنفس راحت را میسر میسازد.
- دارای گوشواره التراسونیک شده میباشد.
- دارای فیکساتور بینی قابل تنظیم ، نرم و راحت است.
- این ماسک ضد حساسیت بوده و به گونه ای طراحی شده است که کاملاً بر روی صورت قرار گیرد و هیچ فاصله ای بین صورت و ماسک ایجاد نکند.
- طراحی Flat Fold فضای جلوی ماسک را بیشتر و قابلیت ماسک حمل را آسانتر می کند.
- بسته بندی تکی استاندارد محصول به جلوگیری از آلوده شدن ماسک در حین استفاده کمک می کند.
- دارای سطح بالایی از مقاومت در برابر عبور مایعات میباشد.
- در حین بازدم به راحتی باز می شود و مقاومت هوا و گرما و رطوبت را در بازدم کاهش می دهد.
- طراحی آیرودینامیکی درجه هوا جریان هوا را از محل قرار گیری عینک دور می کند.


مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، الاستیک، پلی پروپیلن، پلی اتیلن، فلز

سایز بندی:

این ماسک در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ عرضه میگردد.

N95 Respirator

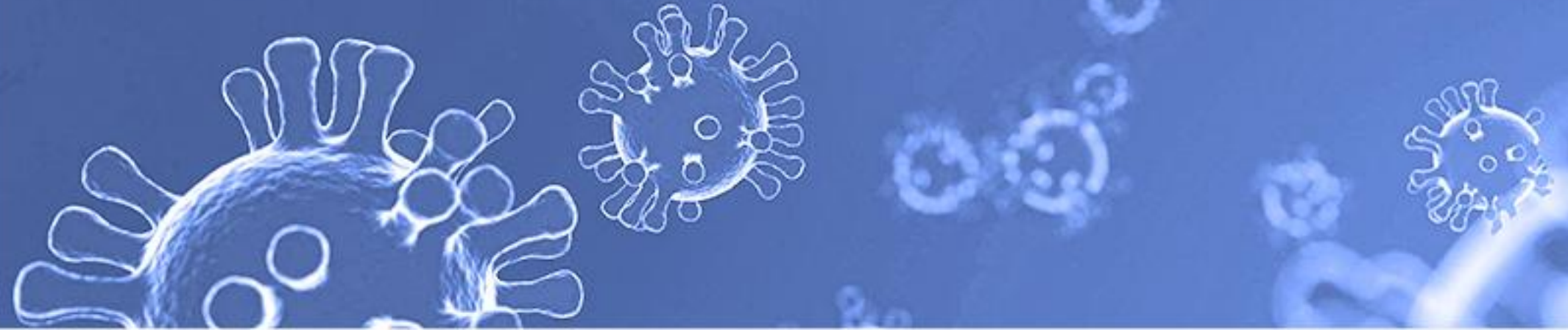

N95 Electronic Respirator

W/Rechargeable Fan
Code: 18301(General)
Code: 18302(Sport)



31 PCS N95
Respirator Filters



Rechargeable
Fan



موارد استفاده:

- جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماری های واگیر دار
- کاهش افت فشار Pressure Drop ماسک
- تهسیل تنفس مبتلایان به بیماریهای تنفسی
- تهسیل تنفس جهت استفاده مجروحین شیمیایی
- جهت استفاده توسط افرادی که باید مدت زیادی از ماسک N95 استفاده نمایند.
- کارایی فیلتراسیون < ۹۵٪ استاندارد N95 آمریکا

ویژگی ها:

- دارای باتری قابل شارژ با قابلیت عملکرد ۵ الی ۱۰ ساعت
- دارای قابلیت تنظیم سرعت فن در سه حالت کند، متوسط و تند و قابلیت عملکرد ۵ الی ۱۰ ساعت متناسب با سرعت فن
- حاوی ۳۱ عدد فیلتر فن و بدنه در هر کارتن
- عرضه شده در دو نسخه ی عمومی و ورزشی

مواد سازنده:

الاستان، نایلون، پلی استر، PE، PP، قطعات الکترونیکی



مدل ورزشی

نام محصول:

ماسک الکترونیکی فن دار N95

مشخصات:

ماسک الکترونیکی فن دار کیورد با بکاری از یک ماژول الکترونیکی هوای خارج ماسک را بعد از عبور از فیلترهای بکار رفته در آن براساس استاندارد N95 آمریکا پالایش باکتری و ویروسی نموده هوای سالم و تمیز و پاک و خنک را به داخل ماسک هدایت نموده و موجب کاهش Differential Pressure ماسک و یا کاهش فشار وارده بر روی سیستم تنفسی شده و تجربه تنفس هوای تازه، سالم، پاک و خنک را فراهم می آورد و علاوه بر اینکه مانع ایجاد رطوبت درون ماسک می گردد، تنفس همراه با ماسک را برای مصرف کننده آسان و لذت بخش مینماید. به علت استفاده از فیلترهایی با استاندارد N95 آمریکا در این ماسک امکان فیلتراسیون ۹۵ درصد ذرات بزرگتر از ۰٫۳ میکرون توسط این ماسک میسر گردیده است. این ماسک برای مقابله با بیماری های ویروسی مانند کرونا، پرسنل کادر درمان، جراحان و متخصصان و داندپزشکان، افراد دارای مشکلات تنفسی، افراد در معرض گرد و غبار دود و مواد شیمیایی می باشند، مناسب میباشد. فیلترهای N95 داخل این محصول قابل تعویض بوده و این نکته این محصول را به یک محصول چند بار مصرف و مقرون به صرفه تبدیل میکند. یک بسته از این محصول حاوی ۳۱ عدد فیلتر N95 بوده و برای مصرف بیش از یک ماه کاربر مناسب میباشد. پس از مصرف فیلترهای موجود در جعبه میتوانید فیلترهای این ماسک را ۳۰ درصد ارزاتر از یک N95 معمولی از این شرکت تهیه نمایید.

Company Introduction



Company Name: Sepid Tan Parniyan Pouyesh Co.

Brand: Cured

Main Activity: Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance & General Medical Devices & Supplies

Manufacture Address: No. 668, Farhang St, Karimabad Village, Golestan State, Iran. Postal Code: 4933147878

Office Address: Golestan Science & Technology Park Bldg, Aq Qala Industrial Park, Golestan State, Iran. Post Office Box: 49175-715

Chief Executive Officer & Founder: Seyedhamed Nabavi, WhatsApp: +989120255191

Tel: (+98)1732604792-3, **Cell Phone:** +989120255191, +989117939713, +989385730286, +989102710310

Websites: www.curedmedical.com / www.curedmedical.ir

Email: info@curedmedical.com

Sepid Tan Parniyan Pouyesh Company was founded in 2013 and launched its productive activity by designing and manufacturing different types of orthosis for physiotherapy and rehabilitation in the beautiful province of Golestan in the north of Iran. Our Company have two registered CURED and XCare Brands as its product's trademark. From the beginning, this company was committed to offering high-quality products, so we worked closely with a team of orthosis and prosthesis experts in our R&D department to reach this goal till now. In 2020, after the Covid-19 epidemic worldwide, with an approach to help prevent the pandemic of this disease worldwide, we saw our duty to produce a variety of specialized medical masks such as three-layer surgical, N95, N99 and Electric Fan masks. Therefore, we have developed our R&D team and added three new production lines for producing various types of specialized medical masks and machines and Nano-filters to our production lines. On the other hand, with our self-sufficiency approach in the development of the production of specialized medical masks, we also added the production line for the production of specialized mask production machines to our production lines. In addition to all these production lines, we started a new production line of Nano-filtration fabrics by Electrospinning method with the aim of self-sufficiency in the production of specialized filtration fabrics with nanotechnology for use in medical masks, HEPA and other specialized medical filters. Today, we are self-sufficient in the manufacture of machines for the production of masks, filtration fabrics and different types of medical masks, and we can have a share in the fight against epidemic diseases such as Covid-19. Our company has a manufacturing license in three specialized groups of physiotherapy and rehabilitation and general medical devices and supplies and general medical consumption (including N95, N99, 3 Layers Surgical Mask) from the Ministry of Health and Medical Education and the Food and Drug Administration of Iran (IFDA). Also, our company is one of the knowledge-based companies located in Golestan Science and Technology Park. It is worth mentioning that, Sepid Tan Parniyan Pouyesh Co. has implemented the necessary international standards in its production line by gaining the international quality management certificates ISO13485, ISO9001 and GMP. In 2014, this company became a member of the Iranian Association of Manufacturers and Exporters of Medical, Dental and Laboratory Equipment. In order to provide services to meet the needs of customers, the investigation and feasibility of providing up-to-date products, under the supervision of the experienced experts, with the aim of high-quality manufacturing have been done. Our R & D department, after research & reviewing the performance of different devices and equipment, has succeeded in manufacturing different types of medical equipment and their production line machines. Today, combining cutting-edge technology and highly professional staff also innovative ideas along with competitive prices, highly focused R&D and efficient communication, have enabled the company to maintain its top position in the Middle East.

CURED[®]

HEALTH IS WHAT WE REPRESENT



P.O. BOX: 49175-715 Golestan State, Iran.
Mfr. Addr. Sepid Tan Parniyan Pouyesh Co,
Farhang St, Karimabad Village, Golestan
State, Iran. P. Code: 4933147878



www.curedmedical.com
www.curedmedical.ir
info@curedmedical.com

